




Instructions for use TOPRO Troja 5G



YouTube

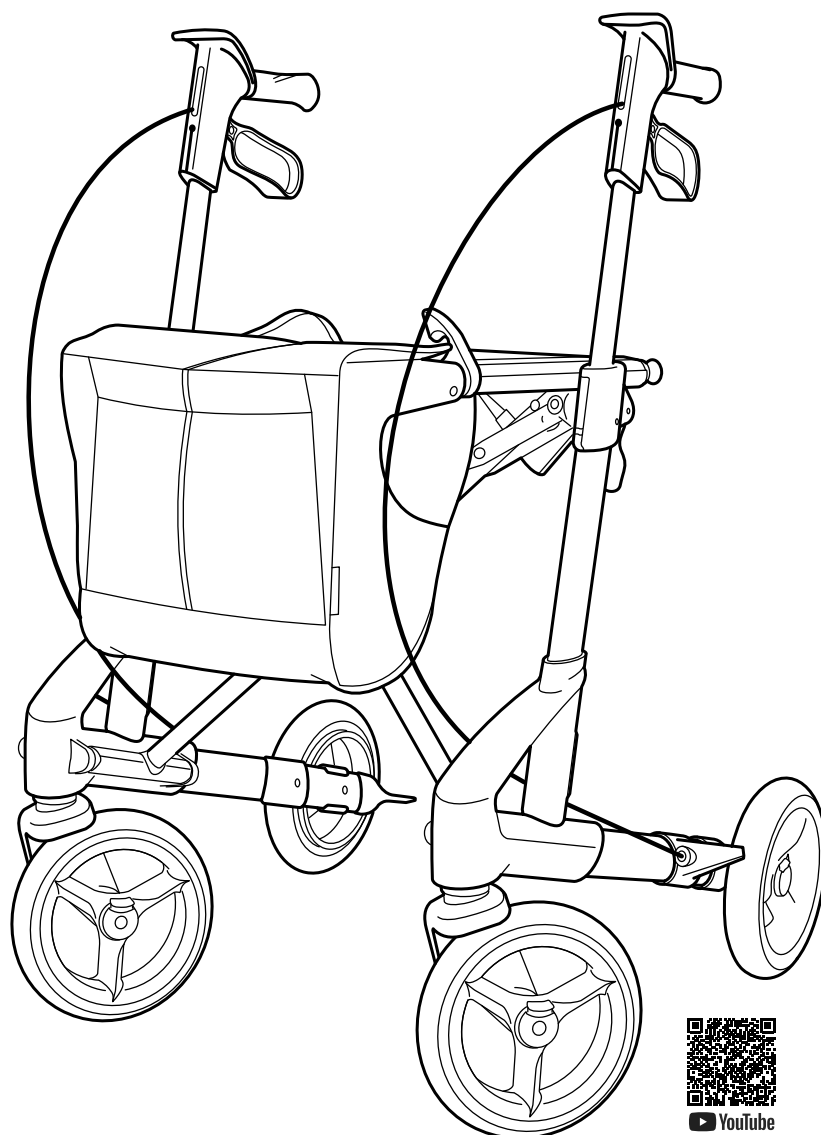

topromobility.com

made in Norway



EN

NO

DE

NL

SV

DA

FI

IS

FR

IT

ES

EN

Illustrations
Dimensions
Technical data
Article numbers

NO

Illustrasjoner
Dimensjoner
Tekniske data
Artikkelnummer

DE

Illustrationen
Maße
Technische Daten
Artikelnummern

NL

Illustraties
Dimensies
Technische data
Artikelnummers

SV

Illustrationer
Mått
Teknisk data
Artikelnummer

DA

Illustrationer
Dimensioner
Teknisk data
Artikelnumre

FI

Kuvitukset
Mitat
Tekniset tiedot
Artikkelinumerot

IS

Myndskreytingar
Mál
Tæknigögn
Vörunúmer

FR

Illustrations
Dimensions
Données techniques
Numéros d'article







IT



Illustrazioni
Dimensioni
Dati tecnici
Numeri di articolo







ES

Ilustraciones
Dimensiones
Datos técnicos
Números de artículo

TOPRO Troja 5G M	814600
TOPRO Troja 5G S	814601

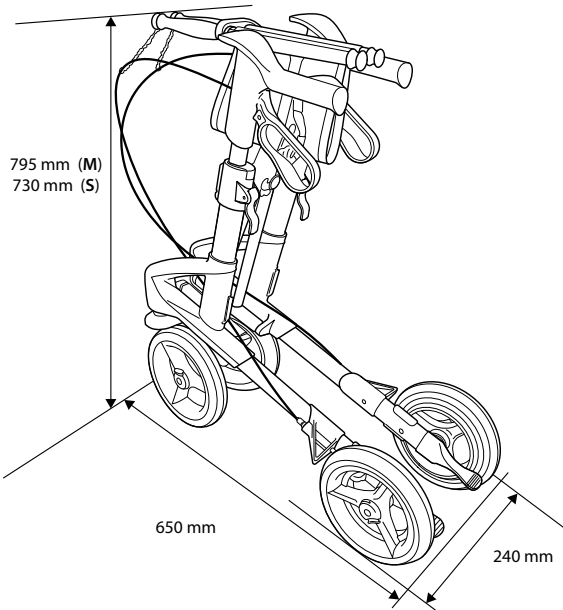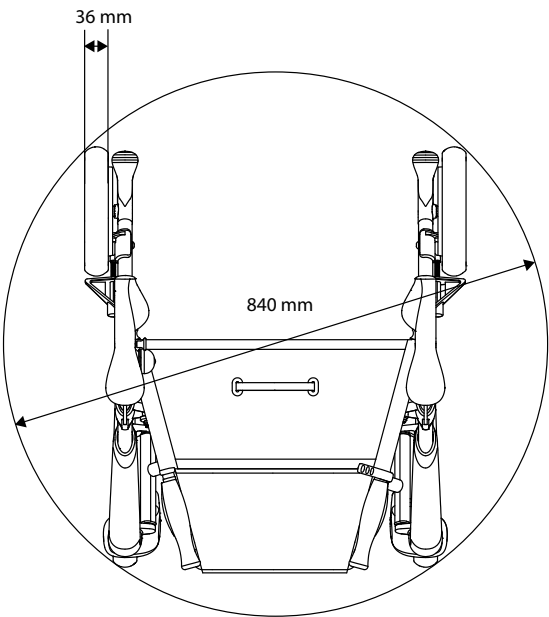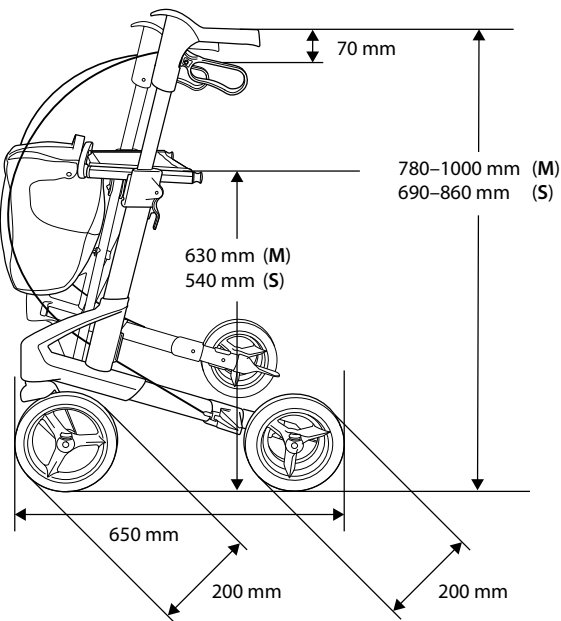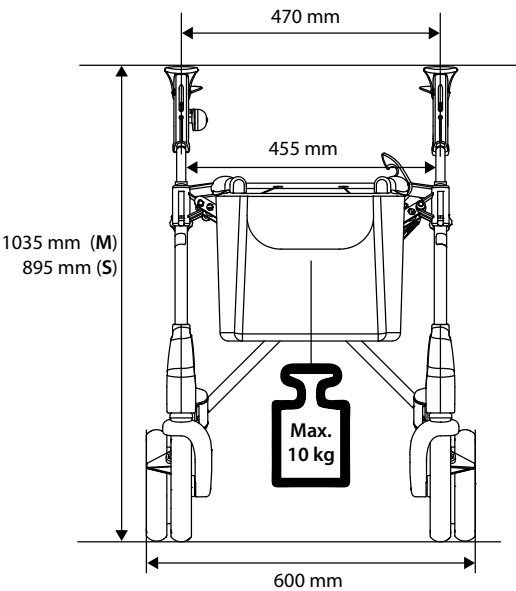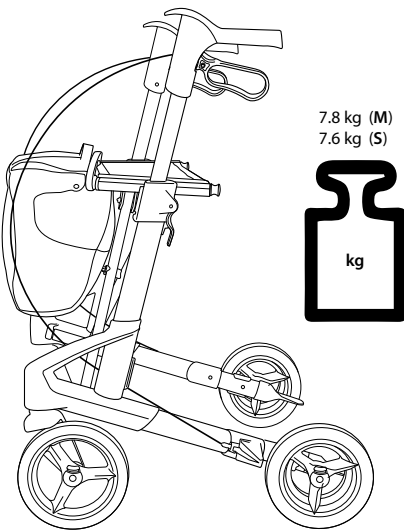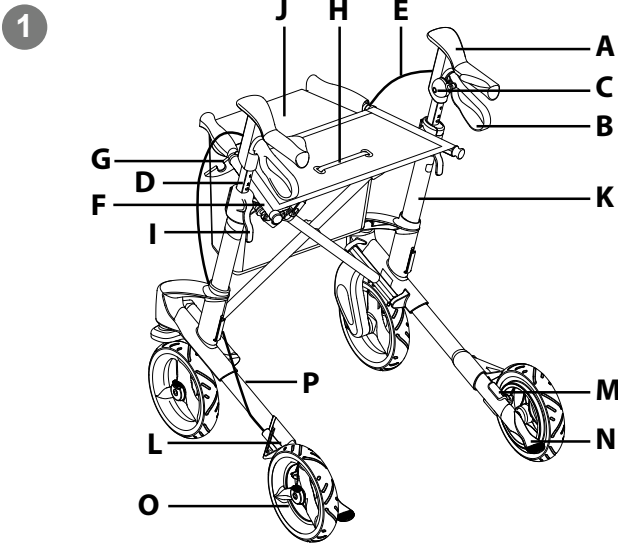

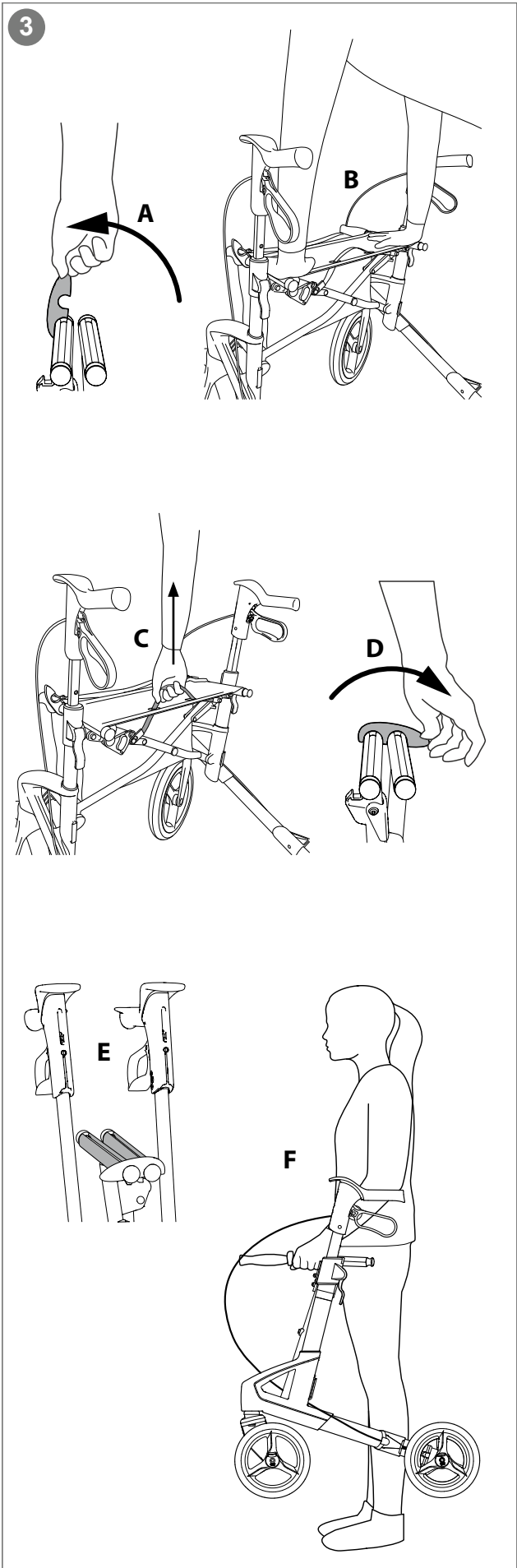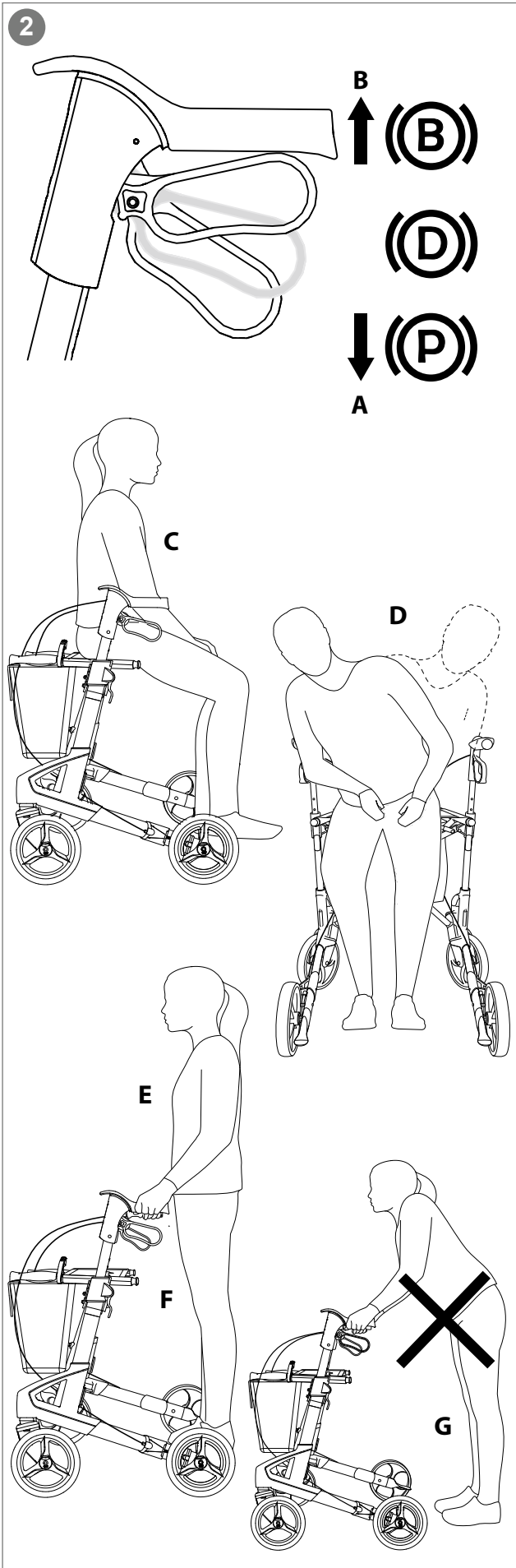

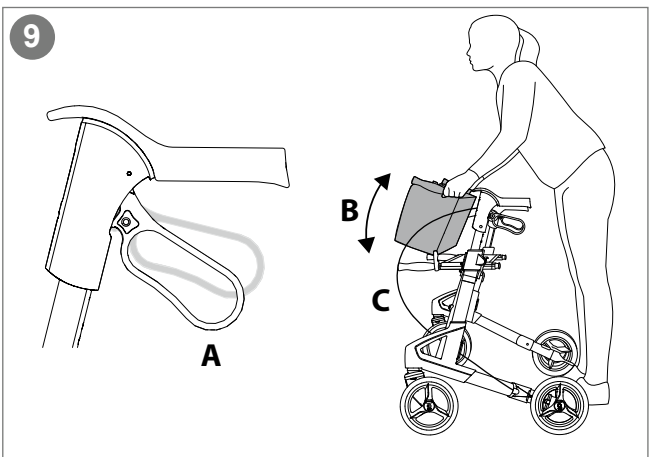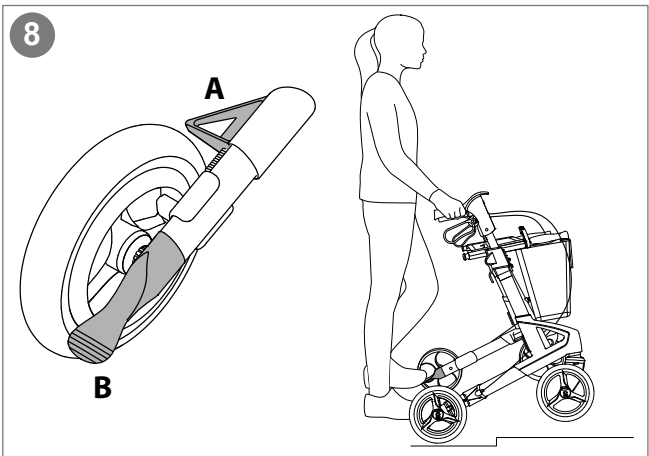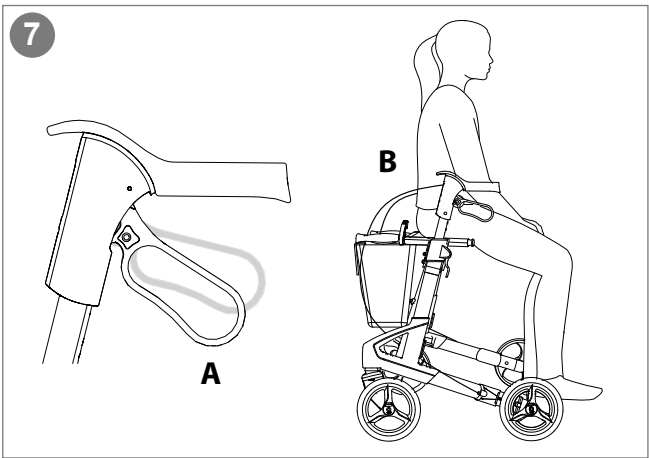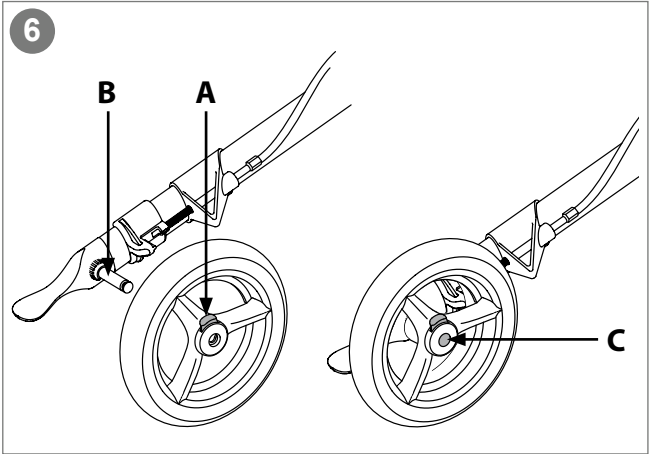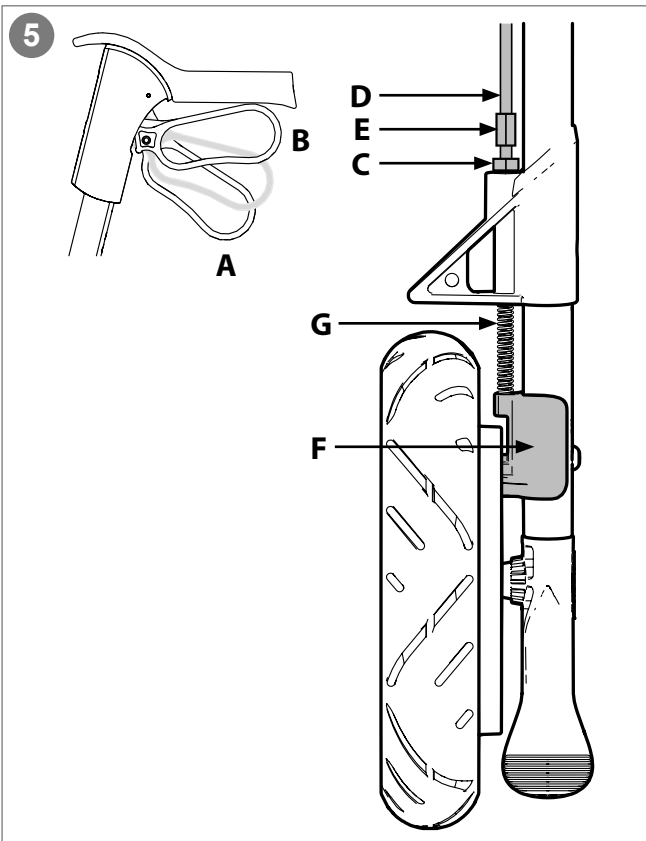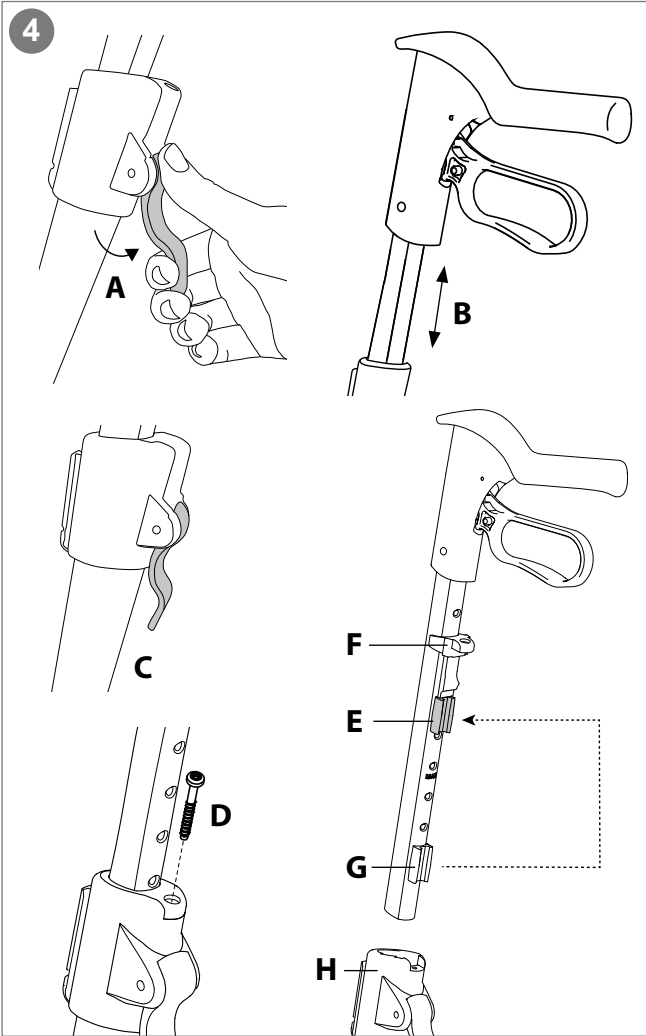

10

1 **TOPRO**

TOPRO Industri AS
Rambekkvegen 1, NO-2816 Gjøvik, Norway

Max 150kg

Max 650mm

Max 600mm

Max 1035mm

MD

2

3 TOPRO Troja 5G (M)

4 Model no. 814600

5 2021-10-15


6 SN 0000254789611

7 GTIN 7054321130000

8

www.topromobility.com

910111321214

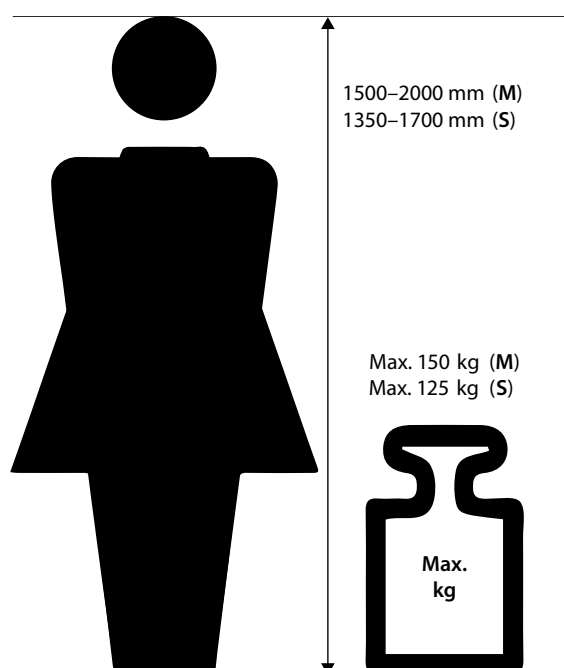

Congratulations with your choice of a new TOPRO rollator

Every TOPRO rollator is developed, designed and manufactured in Norway. The product conforms to Medical Device Regulation (EU) 2017/745. It is tested and approved according to EN ISO 11199-2:2021. On receipt of the goods, please check your product. If you have any queries, please contact your mobility shop or dealer immediately. If you have problems reading this user manual, an electronic version is available on topromobility.com.

Intended use

The TOPRO Troja 5G shall give support to users with reduced balance and/or reduced walking ability. It is designed to be pushed, not pulled. The integrated seat provides an opportunity for the user to rest if needed. The intended user is an adult. Height and weight restrictions apply.
Contraindications: The product is not suitable for persons with low strength in arms, with very poor balance, or with considerable cognitive disabilities. The product is designed and approved for both indoors and outdoors use. Outdoors the rollator is intended to be an aid for walking on roads and paths. It is not suitable in rough and/or steep terrain, neither for stairs.

To get to know the rollator and learn how to use it properly, training by a professional is recommended.

0 The grey numbered circles in this user manual refers to the numbered information graphic and illustrations inside the cover

1 Get to know your TOPRO product

- | | |
|--|--------------------------------------|
| A Handle | I Lever for height adjustment |
| B Brake lever | J Shopping bag |
| C Bell | K Side frame |
| D Handle tube | L Edge guard |
| E Brake cable | M Brake block |
| F Seat bars / Carrying handle | N Tilting function |
| G Locking clamp | O Detachable wheels |
| H Seat with strap for folding mechanism | P Product label |

2 Safety

When folding and unfolding the rollator, be aware so you do not hurt your fingers.

Be aware not to put your fingers in open holes or between stationary parts.

Make sure that the levers for height adjustment are positioned downwards.

When stationary or parked, make sure the parking brakes on both sides are activated (A).

Do not use the rollator on stairs. Be careful when passing kerbs etc.

Check the brakes before use every time, and that the rollator locks in unfolded position.

Do not use the rollator to transport heavy loads or persons.

Be aware that some parts of the rollator might feel hot or cold when exposed to extreme temperatures.

Do not modify the product as this might put your safety at risk and the guarantee will become void.

Before sitting on the seat (C), make sure the parking brakes on both sides are activated (A).

To reduce the risk of falling, do not lean or bend sideways or over to the back of the rollator whilst in the seated position (D). Do not tilt the rollator too much sideways, to avoid the risk of falling. For the same reason, bags etc. must never be hung on the handles.

To give the right support and safety, walk straight and make sure the rollator is kept as close to your body as possible (E). Walk between the rear wheels (F), not behind them (G).

Be aware that the rollator may roll faster than you when walking downhill, which may put you in risk of falling. Activate the driving brakes to adjust the speed (B).

Be careful when wearing fluttering skirts or trousers as they could get caught in the wheels, which could lead to falling. Wear sturdy footwear to avoid injuries.

For safety reasons it is prohibited to sit on the rollator during public transportation. Store your rollator safely and make sure the parking brakes on both sides are activated (A).

Do not use the rollator on slippery or icy surfaces.

Keep the rollator away from fire and hot items.

Do not climb on the rollator.

3 Unfolding / Folding

Unfolding: Release the lock clamp positioned at the seat bars (A). Press the seat bars down and outwards. The side frames will slide apart. Press down the seat bars (B). You will hear a clicking sound. The rollator is now locked in its open position.

Folding: Pull the strap on the seat (C) and press the side frames together.

Lock the clamp (D) over the seat bars.

Carrying the rollator: The rollator must not be carried by the seat strap or the brake cables. Fold the rollator as shown on the illustration (E). When folded, carry the rollator by the seat bars (F).

4 Handles / Memory function

Height adjusting: Pull the lever (A) upwards and adjust the handle tube to a suitable height (B). Release the lever and pull the handle tube slightly up and down until you hear a click. Make sure that the lever is positioned downwards (C). Adjust both handles to the same height by comparing the number scale on each side. *It is recommended that the handles are set to the same height as your wrists when your arms are hanging alongside your body.*

Memory Function: Decide on the height of the handles (see number scale). Count visible holes at the back of the handle tubes. Unscrew the screw (D) on top of the fastening piece. Pull the lever upwards (A) and pull the tube (E) out of the frame. The fastening piece (F) will now follow the handle tube. Move the fastening piece (F) so that the number of holes above it equals to the previously counted holes. Fit the red memory chip (G) on the handle tube in the first available hole under the fastening piece (F). Pull the lever upwards (A) and push the handle tube (E) and fastening piece (F) downwards and into the side frame (H). Mount the screw (D) on top of the fastening piece. Pull the lever upwards (A) and pull the handle up until it stops, and then release the lever. From now on, when the handles are in the lowest position, they will stop in the pre-set position when pulled up.

5 Brakes

Make sure the brakes are working before every trip. Each brake lever (A) works on each of the rear wheels. *Do not drive or push the rollator while the parking brakes are activated.*

Parking brakes: Push both brake levers (A) downwards until they lock. Both rear wheels are now locked.

Squeeze both brake levers upwards to release the parking brakes.

Driving brakes: Pull both brake levers (B) upwards to reduce speed. *Do not use continuously while the rollator is in motion.*

Adjusting / checking: Loosen the nut (C). Tighten the brake cable (D) with the adjustment screw (E). Adjust the brake block (F) so the distance to the inner drum brake is approximately 1.5 mm, and then tighten the nut (C). Turn the wheel around to check that the brake block is not touching the wheel.

Maintaining: Clean the brake block (F) and the brake spring (G) regularly. The wheels and brakes can be replaced if they are worn out or damaged.

6 Detachable wheels

Removal: Loosen the brake lever. Push down the red button on the hub (A) and slide the wheel off the axle (B) while still pushing the button down.

Attachment: Loosen the brake lever. Slide the wheel unto the axle (B). Push the wheel as far as possible inwards on the axle to make the wheel snap onto the axle. You will hear a "click" when the wheel secures in locked position. The wheel is securely fastened when the axle is completely visible in the middle of the hub (C). Gently pull the wheel to check that it is securely fastened to the axle. After the new wheel has been applied to the rollator, ensure that the brakes are functioning properly. Readjust them if necessary (see section Brakes). *Please note that the front and rear wheels are different. The rear wheels have a ring for interior braking.*

7 Seat

The rollator has a safe and convenient mesh seat, which provides view to the ground while walking. It can easily be wiped off with a cloth if needed. The parking brakes must be activated before using the seat. Push both brake levers downwards until they lock (A). Both rear wheels are now locked. Sit with your back towards the bag (B).

8 Edge guard / Tilt function

Edge guard: The edge guards (A), which are in front of the rear wheels prevent the rear wheels from catching on corners, door frames etc.

Tilt function: To use the tilt function use the front of the foot and press down

on the tilt pedal (B), which is beside the rear wheel. This helps to tilt the rollator over thresholds, edges etc. Please note: Be careful when passing kerbs etc.

9 Shopping bag

The bag holds up to 10 kilos and can be washed gently at up to 60 °C.

Mounting: Apply the parking brakes (A). Place the brackets on the bag (B) onto the carrying handles of the rollator and push them downwards. When positioned correctly, you will hear a clicking sound. Ensure that the brake cable still runs unrestrained along the frame (C).

Removal: Apply the parking brakes (A). Place your hands towards the front of the bag, on both sides. Lift the bag up while pressing it slightly together. Be aware so you do not hurt your fingers.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip offers ergonomic grip and support surfaces. The top front of the handles provides steady grip position when getting up from a chair or couch. Always make sure the parking brakes are activated when getting up from seated position. The ErgoGrip also offers extra support while standing. Always use the traditional grip position for easy access to the driving brakes while walking.

Transport

The rollator should be transported in the folded and locked position (see section 3 Unfolding / Folding). Secure the locking clamp properly, which ensures that the rollator cannot unfold unintentionally. Be careful when loading the rollator into a vehicle, giving attention to securing it. The rollator can be laid down by lifting it by the frame tube.

Storage

The rollator should be stored in an upright position. If stored outdoors it must be under a cover to protect it. Do not leave the rollator unattended. Do not put heavy items on top of the rollator during storage.

Cleaning

The rollator can be cleaned using a damp cloth. In case of mud and grime accumulation, a cloth with a mild washing detergent can be used followed by rinsing with lukewarm water. Avoid flushing directly against ball bearings (in wheels and front forks). Do not use abrasives or steam wash. Dry the rollator using a soft cloth.

Disinfection

Disinfection must only be carried out by authorized personnel. Please contact your local dealer or mobility aid centre. During disinfection sufficient protective equipment must be worn, and the instructions of the disinfectant manufacturer must be followed. The surface of the rollator should be cleaned with a soft cloth or sponge and an approved chemical disinfectant containing 70–80 % ethanol. We advise against disinfectant that contains chlorine or phenol. *The manufacturer cannot be held responsible for any damage or injuries that may occur using harmful disinfectant/measures or disinfection carried out by unauthorized personnel.*

Inspection / Maintenance / Re-use

It is recommended that inspection and maintenance are carried out regularly (frequency is determined by how and how often the rollator is used). Check the following items: Frame, screws, handles, handle tubes, brakes, brake parts, wheels, seat and accessories. This also applies when the rollator is to be prepared for re-use. Please see detailed instructions in this user manual about maintenance of brakes and cleaning/disinfection. The recommended maintenance is not a requirement, and no preventive maintenance is required provided that the rollator is used as intended according to this user manual.

Material / Recycling

The rollator is made of plastic-coated aluminium tubes, plastic couplings and material made of plastic and polyester. There are ball bearings in all wheels and forks. Most rollator parts can be recycled. Dispose the rollator and its packaging according to the applicable regulations in your country. For information, please contact your public authorities.

Warranty

TOPRO Troja 5G is guaranteed free for faults and defects for 7 years. Damage caused by incorrect use or parts that are exposed to natural wear and tear (e.g., brake block, brake cable, wheel, bag, seat and handle) are exempt from the 7-year warranty. For repairs during the warranty period, please contact your local mobility shop or dealer. The warranty is void if unauthorised spare parts or accessories have been or are being used on the product. The expected lifespan of the product is estimated to be 10 years if it is used in the correct manner according to this user manual and its safety and maintenance instructions.

10 Product label

- 1 - Manufacturer
- 2 - Consult Instructions for use (blue icon)
- 3 - Model name
- 4 - Model number
- 5 - Date of manufacture
- 6 - Serial number
- 7 - Global Trade Item Number
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Maximum user weight
- 10 - Maximum length of rollator
- 11 - Maximum width / height of rollator
- 12 - Intended for indoors and outdoors use
- 13 - Medical Device
- 14 - CE marking (This product conforms to Medical Device Regulation (EU) 2017/745)

Accessories

	TOPRO Item No.
Back support with padding, 67 cm	815270
Back support with padding, 75 cm	815272
Tray	814728
Anti-slip mat for tray	814059
Crutch holder, black	814040
Bottle holder, black	814043
LED lamp with clip-on and USB plug	815260
Umbrella with attachment, black	814068
One-handed brake	814026
Guiding handle for the visually impaired	814014
Rear bag with zipper	814046
Name tag	814024
Roll resistance system, pair	814038
Transport bag	814042
Basket for oxygen bottle (only compressed, not liquid)	814009
Off-road wheels, set of four	815302
Studded tyres, 2 rear wheels	815331

Accessories mounted on the rollator may influence stability, we therefore advise you to use them with care. Accessories can be ordered separately to enable TOPRO Troja 5G to be customized to individual needs. Contact your mobility shop, dealer or TOPRO for an updated overview of available accessories or visit our homepage topromobility.com.

Gratulerer med valget av en ny TOPRO-rullator

Hver TOPRO-rullator er utviklet, designet og produsert i Norge. Produktet er i samsvar med forordning av medisinsk utstyr (EU) 2017/745. Det er testet og godkjent i henhold til EN ISO 11199-2:2021. Ved mottak av varen, vennligst sjekk produktet. Hvis du har spørsmål, må du kontakte mobilitetsbutikken eller forhandleren umiddelbart. Hvis du har problemer med å lese denne brukerhåndboken, er en elektronisk versjon tilgjengelig på topromobility.com.

Tiltenkt bruk

TOPRO Troja 5G skal gi støtte til brukere med redusert balanse og/eller redusert gangevne. Den er designet for å skyves, ikke trekkes. Det integrerte setet gir brukeren muligheten til å hvile om nødvendig. Den tiltenkte brukeren er voksen. Høyde- og vektbegrensninger gjelder. *Kontraindikasjoner: Produktet er ikke egnet for personer med lav styrke i armene, med svært dårlig balanse eller med betydelig kognitiv funksjonshemming. Produktet er designet og godkjent for innen- og utendørs bruk. Utendørs er rullatoren ment å være et hjelpemiddel for å gå på veier og stier. Den er ikke egnet i ulendt og/eller bratt terreng, heller ikke for trapper.*

For å bli kjent med rullatoren og lære å bruke den riktig, anbefales opplæring av en profesjonell.

0 De grå nummererte sirklene i denne brukerhåndboken refererer til den nummererte informasjonsgrafikken og illustrasjonene inne i omslaget

1 Bli kjent med TOPRO-produktet ditt

A Håndtak	I Hendel for høydejustering
B Bremsenhendel	J Handlekurv
C Ringeklokke	K Sideramme
D Håndtaksrør	L Kantavviser
E Bremskabel	M Bremskloss
F Setestenger / Bærehåndtak	N Vippefunksjon
G Låseklemme	O Avtakbare hjul
H Sete med utløserstropp for foldemekanisme	P Produktetikett

2 Sikkerhet

Når du folder sammen/folder ut rullatoren, må du være oppmerksom slik at du ikke skader fingrene.

Vær oppmerksom på ikke å sette fingrene i åpne hull eller mellom stasjonære deler.

Pass på at hendlene for justering av håndtakenes høyde peker nedover under bruk av produktet.

Når du står stille eller parkerer, må du kontrollere at parkeringsbremsene på begge sider er aktivert (A).

Ikke bruk rullatoren i trapper. Vær forsiktig når du passerer fortauskanter osv.

Kontroller bremsene før bruk hver gang, og at rullatoren låses i utfoldet stilling.

Ikke bruk apparatet til å transportere tung last eller personer.

Vær oppmerksom på at noen deler av rullatoren kan føles varme eller kalde når de utsettes for ekstreme temperaturer.

Produktet må ikke modifiseres, da dette kan sette din sikkerhet i fare, og garantien vil bli ugyldig.

Før du setter deg på setet (C), må du kontrollere at parkeringsbremsene på begge sider er aktivert (A).

For å redusere risikoen for fall, må du ikke lene deg / bøye deg sidelengs eller over til baksiden av rullatoren, mens du sitter på setet (D). Rullatoren må heller ikke vippes for mye sidelengs, for å unngå at den velter. Av samme grunn må poser etc. aldri henges på håndtakene.

For å gi riktig støtte og sikkerhet, gå rett og sørg for at rullatoren holdes så nær kroppen din som mulig (E). Gå mellom bakhjulene (F), ikke bak dem (G).

Vær oppmerksom på at rullatoren kan rulle raskere enn deg når du går nedoverbakke, noe som kan sette deg i fare for å falle. Aktiver kjørebremser for å justere hastigheten (B).

Vær forsiktig når du bruker flagrende skjørt eller bukser, da de kan bli sittende fast i hjulene, noe som kan føre til fall. Bruk solid fottøy for å unngå skader.

Av sikkerhetsmessige årsaker er det forbudt å sitte på rullatoren under offentlig transport. Oppbevar rullatoren på en sikker måte, og sørg for at parkeringsbremsene på begge sider er aktivert (A).

Ikke bruk rullatoren på glatte eller isete overflater.

Hold rullatoren unna ild og varme gjenstander.

Ikke klatre på rullatoren.

3 Utfolding / Sammenfolding

Utfolding: Løsne låseklemmen som er plassert på setestengene (A). Trykk setestengene ned og utover. Siderammene glir fra hverandre. Trykk ned setestengene (B). Du vil høre en klikkelyd. Rullatoren er nå låst i åpen stilling.

Sammenfolding: Trekk i stroppen på setet (C) og trykk siderammene sammen. Lås klemmen (D) over setestengene.

Bære rullatoren: Rullatoren må ikke bæres av utløserstroppen eller bremsekablene. Fold rullatoren sammen som vist på illustrasjonen (E). Bær rullatoren etter setestengene (F) når rullatoren er sammenfoldet.

4 Håndtak / Minnefunksjon

Høydejustering: Trekk spaken (A) oppover og juster håndtaket (B) til en passende høyde. Slipp spaken og bevege håndtaket litt opp og ned til du hører et klikk. Sørg for at spaken peker nedover (C). Juster begge håndtakene til samme høyde ved å sammenligne tallskalaen på hver side. *Det anbefales at håndtakene er satt i samme høyde som håndleddene når armene henger ved siden av kroppen.*

Minnefunksjon: Bestem høyden på håndtakene (se tallskala). Tell synlige hull på baksiden av håndtakrørene. Skru ut skruen (D) på toppen av festestykket. Trekk spaken (A) oppover og trekk røret (E) ut av rammen. Festestykket (F) vil nå følge håndtakrøret. Flytt festestykket (F) slik at antall hull over det tilsvarer de tidligere telte hullene. Sett inn den røde minnebrikken (G) i det første tilgjengelige hullet under festestykket (F). Trekk spaken (A) oppover og skyv håndtakrøret (E) og festestykket (F) nedover og inn i siderammen (H). Monter skruen (D) på toppen av festestykket. Trekk spaken (A) oppover og trekk håndtaket opp til det stopper, og slipp deretter spaken. Fra nå av vil håndtakene stoppe i den forhåndsinnstilte posisjonen når de trekkes opp fra nederste posisjon.

5 Bremses

Pass på at bremsene fungerer før hver tur. Hver bremsehendel (A) fungerer på hvert av bakhjulene. *Ikke kjør eller skyv rullatoren når parkeringsbremsene er aktivert.*

Parkeringsbremses: Skyv begge bremsehendlene (A) nedover til de låses. Begge bakhjulene er nå låst. Klem begge bremsehendlene oppover for å deaktivere parkeringsbremsene.

Kjørebremser: Trekk begge bremsehendlene (B) oppover for å redusere hastigheten. *Må ikke brukes kontinuerlig mens rullatoren er i bevegelse.*

Justering/kontroll: Løsne mutteren (C). Stram bremsekabelen (D) med justeringsskruen (E). Juster bremseblokken (F) slik at avstanden til den indre trommelbremsen er ca. 1,5 mm, og stram deretter mutteren (C). Drei hjulet rundt for å kontrollere at bremseblokken ikke berører hjulet.

Vedlikehold: Rengjør bremseblokken (F) og bremsefjæren (G) ofte. Hjulene og bremsene kan byttes ut hvis de er utslette eller skadet.

6 Avtakbare hjul

Fjerning: Løsne bremsehendelen. Trykk ned den røde knappen på navet (A) og skyv hjulet av akselen (B) mens du fortsatt trykker ned knappen.

Montering: Løsne bremsehendelen. Skyv hjulet på akselen (B). Skyv hjulet innover på akselen til det klikker på plass. Du vil høre et «klikk» når hjulet er på plass. Hjulet festes sikkert når akselen er helt synlig midt i navet (C). Trekk forsiktig i hjulet for å kontrollere at det er godt festet til akselen. Når det nye hjulet er påført rullatoren, må det kontrolleres at bremsene fungerer som de skal. Juster dem om nødvendig (se avsnittet *Bremses*). *Vær oppmerksom på at for- og bakhjulene er forskjellige. Bakhjulene har en ring for innvendig bremsing.*

7 Sete

Rullatoren har et trygt og praktisk nettingsete, som gir utsikt til bakken mens du går. Det kan lett tørkes av med en fuktig klut om nødvendig. Parkeringsbremsene må være aktivert før setet tas i bruk. Skyv begge bremsehendlene nedover til de låses (A). Begge bakhjulene er nå låst. Sitt med ryggen mot kurven (B).

8 Kantavviser / Vippefunksjon

Kantavviser: Kantaviser (A), som er foran bakhjulene hindrer bakhjulene i å fange på hjørner, dørkarmen etc.

Vippefunksjon: For å bruke vippefunksjonen, bruk forsiden av foten og trykk ned på vippepedalen (B), som er ved siden av bakhjulet. Dette bidrar til å vippe rullatoren over terskler, kanter etc. Merk: Vær forsiktig når du passerer fortauskanter osv.

9 Handlebag

Handlebagen rommer opptil 10 kilo og kan vaskes forsiktig ved maksimum 60 °C.

Montering: Aktiver parkeringsbremsene (A). Plasser brakettene på bagen (B) på bærehåndtakene på rullatoren og trykk dem nedover. Når den er riktig plassert, hører du en klikkelyd. Påse at bremsekabelen fortsatt kan beveges uhindret langs rammen (C).

Fjerning: Aktiver parkeringsbremsene (A). Plasser hendene mot forsiden av bagen, på begge sider. Løft bagen opp mens den klemmes litt sammen. Vær oppmerksom slik at du ikke skader fingrene.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip tilbyr ergonomisk grep og støtteflater. Den øverste delen av håndtakene gir trygt grep når man reiser seg opp fra en stol eller sofa. Sørg alltid for at parkeringsbremsene er aktivert når du reiser deg opp fra sittende stilling. ErgoGrip tilbyr også ekstra støtte mens du står. Bruk alltid den tradisjonelle gripeposisjonen for enkel tilgang til kjørebremser mens du går.

Transport

Rullatoren skal transporteres i sammenfoldet og låst posisjon (se avsnittet *Utfolding / Sammenfolding*). Påse at låseklemmen er på, slik at rullatoren ikke kan utfolde seg utilsiktet. Vær forsiktig når du legger rullatoren inn i et kjøretøy, og pass på at den er forsvarlig sikret. Rullatoren kan legges ned ved å løfte den i rammerøret.

Lagring

Rullatoren bør oppbevares stående. Hvis den oppbevares utendørs, må den helst være under et tak/dekke for å beskytte den. Ikke la rullatoren stå uten tilsyn. Ikke legg tunge gjenstander oppå rullatoren under lagring.

Renhold

Rullatoren kan rengjøres med en fuktig klut. Ved opphopning av gjørme og smuss kan en klut med mildt vaskemiddel brukes etterfulgt av skylling med lunkent vann. Unngå å skylle direkte mot kulelagre (i hjul og forgafler). Ikke bruk slipemidler eller dampvask. Tørk rullatoren med en myk klut.

Desinfeksjon

Desinfeksjon må kun utføres av autorisert personell. Ta kontakt med din lokale forhandler eller hjelpemiddelsentral. Under desinfeksjon må tilstrekkelig verneutstyr brukes, og instruksjonene fra desinfeksjonsmiddelprodusenten må følges. Overflaten på rullatoren kan rengjøres med en myk klut eller svamp og et godkjent kjemisk desinfeksjonsmiddel som inneholder 70–80% etanol. Vi fraråder desinfeksjonsmiddel som inneholder klor eller fenol. *Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for feil eller skader som kan oppstå ved bruk av skadelig desinfeksjonsmiddel/-metoder eller desinfeksjon utført av uautorisert personell.*

Inspeksjon / Vedlikehold / Gjenbruk

Det anbefales at inspeksjon og vedlikehold utføres regelmessig (frekvensen bestemmes av hvordan og hvor ofte rullatoren brukes). Kontroller følgende elementer: Rør, ramme, skruer, håndtak, håndtaksrør, bremses, bremsedeler, hjul, sete og tilbehør. Dette gjelder også når rullatoren skal klargjøres for gjenbruk. Se detaljerte instruksjoner i denne bruksanvisningen om vedlikehold av bremses og rengjøring/desinfeksjon. Det anbefalte vedlikeholdet er ikke et krav, og det er ikke nødvendig med forebyggende vedlikehold, forutsatt at rullatoren brukes som den skal i henhold til denne brukerhåndboken.

Materiale / Resirkulering

Rullatoren er laget av plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og materiale laget av plast og polyester. Det er kulelagre i alle hjul og gafler. De fleste rullatordeler kan resirkuleres. Kast rullatoren og emballasjen i henhold til gjeldende forskrifter i ditt land. Hvis du ønsker mer informasjon, vennligst kontakt offentlige myndigheter.

Garanti

TOPRO Troja 5G er garantert fri for feil og mangler i 7 år. Skader forårsaket av feil bruk eller deler som utsettes for naturlig slitasje (f.eks. bremsekloss, bremsekabel, hjul, kurv, sete og håndtak) er unntatt fra garantien. For reparasjoner i garantiperioden, ta kontakt med din lokale mobilitetsbutikk eller forhandler. Garantien bortfaller hvis uautoriserte reservedeler eller tilbehør har blitt eller brukes på produktet. Produktets forventede levetid er beregnet til 10 år hvis det brukes på riktig måte i henhold til denne bruksanvisningen og dens sikkerhets- og vedlikeholdsinstruksjoner.

10 Produktetikett

- 1 - Fabrikant
- 2 - Se bruksanvisningen (blått ikon)
- 3 - Navn på modell
- 4 - Modellnummer
- 5 - Produksjonsdato
- 6 - Serienummer
- 7 - Varenummer for global handel
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Maksimal brukervekt
- 10 - Maksimal lengde på rullator
- 11 - Maksimal bredde / høyde på rullator
- 12 - Beregnet for innen- og utendørs bruk
- 13 - Medisinsk utstyr
- 14 - CE-merke (Dette produktet er i samsvar med forordningen om medisinsk utstyr (EU) 2017/745)

Tilbehør

	TOPRO Item No.
Ryggstøtte med polstring, 67 cm	815270
Ryggstøtte med polstring, 75 cm	815272
Brett	814728
Antisklimatte for brett	814059
Krykkeholder, svart	814040
Flaskeholder, svart	814043
LED-lykt med klips og USB-kontakt	815260
Paraply med feste, svart	814068
Enhåndsbrems	814026
Styrehandtak for ledsager til synshemmede	814014
Veske bak, med glidelås	814046
Navneskilt	814024
Rullemotstandssystem, par	814038
Transportbag	814042
Kurv for oksygenflaske (kun komprimert, ikke flytende)	814009
Terrenghjul, sett med fire	815302
Piggdekk, 2 bakhjul	815331

Tilbehør montert på rullatoren kan påvirke stabiliteten, vi anbefaler derfor at du bruker dem med forsiktighet. Tilbehør kan bestilles separat for å gjøre det mulig å tilpasse TOPRO Troja 5G til individuelle behov. Kontakt din mobilitetsbutikk, forhandler eller TOPRO for en oppdatert oversikt over tilgjengelig tilbehør eller besøk vår hjemmeside topromobility.com.

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl eines neuen TOPRO-Rollators

Jeder TOPRO-Rollator wird in Norwegen entwickelt, entworfen und hergestellt. Das Produkt ist konform mit der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745. Es ist nach EN ISO 11199-2:2021 geprüft und zugelassen. Bitte überprüfen Sie bei Erhalt der Ware Ihr Produkt. Bei Fragen wenden Sie sich bitte umgehend an Ihr Sanitätshaus oder Ihren Händler. Wenn Sie Probleme beim Lesen dieser Gebrauchsanleitung haben, finden Sie eine elektronische Version auf topromobility.com.

Verwendungszweck

Der TOPRO Troja 5G soll Benutzer mit eingeschränktem Gleichgewicht und/oder verminderter Gehfähigkeit unterstützen. Er ist so konzipiert, dass er geschoben und nicht gezogen wird. Der integrierte Sitz bietet dem Benutzer die Möglichkeit, sich bei Bedarf auszuruhen. Der vorgesehene Benutzer ist ein Erwachsener. Es gelten Größen- und Gewichtsbeschränkungen. *Kontraindikationen: Das Produkt ist nicht für Personen mit geringer Kraft in den Armen, mit sehr schlechtem Gleichgewicht oder mit erheblichen kognitiven Einschränkungen geeignet. Das Produkt ist für den Innen- und Außenbereich konzipiert und zugelassen. Im Freien soll der Rollator eine Hilfe beim Gehen auf Straßen und Wegen sein. Es ist nicht für unwegsames und/oder steiles Gelände geeignet, auch nicht für Treppen.*

Um den Rollator kennenzulernen und zu lernen, wie man ihn richtig benutzt, wird eine Schulung durch einen Fachmann empfohlen.

0 Die grauen nummerierten Kreise in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich auf die nummerierten Informationsgrafiken und Abbildungen im Innenteil des Umschlags

1 Lernen Sie Ihr TOPRO Produkt kennen

A Handgriff	I Hebel zur Höhenverstellung
B Bremshebel	J Einkaufstasche
C Klingel	K Seitenrahmen
D Handgriffrohr	L Kantenabweiser
E Bremskabel	M Bremsblock
F Sitzstangen / Tragegriff	N Ankipphilfe
G Verriegelungsklemme	O Abnehmbare Räder
H Sitz mit Greifsnur für Klappmechanismus	P Produktetikett

2 Sicherheit

Achten Sie beim Falten und Entfalten des Rollators darauf, dass Sie sich Ihre Finger nicht verletzen.

Achten Sie darauf, Ihre Finger nicht in offene Löcher oder zwischen feststehende Teile zu stecken.

Stellen Sie sicher, dass der Hebel zur Höhenverstellung der Griffe fest verriegelt ist.

Wenn Sie stehen oder parken, stellen Sie sicher, dass sich die Feststellbremsen auf beiden Seiten in der verriegelten Position befinden (A).

Verwenden Sie den Rollator nicht auf Treppen. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Bordsteine überqueren etc.

Überprüfen Sie die Bremsen vor dem Gebrauch jedes Mal und ob der Rollator in entfalteter Position einrastet.

Verwenden Sie den Rollator nicht zum Transportieren von Personen oder schwerer Lasten.

Beachten Sie, dass sich einige Teile des Rollators heiß oder kalt anfühlen können, wenn sie extremen Temperaturen ausgesetzt sind.

Ändern Sie das Produkt nicht, da dies Ihre Sicherheit gefährden könnte und die Garantie erlischt.

Bevor Sie sich auf den Sitz (C) setzen, stellen Sie sicher, dass sich die Feststellbremsen auf beiden Seiten in der verriegelten Position befinden (A).

Um das Risiko eines Sturzes zu vermeiden, lehnen oder beugen Sie sich nicht

seitlich oder zur Rückseite des Rollators, während Sie sich in sitzender Position befinden (D). Kippen Sie den Rollator nicht zu sehr zur Seite, um das Sturzrisiko zu vermeiden. Aus dem gleichen Grund dürfen Taschen etc. niemals an den Griffen aufgehängt werden.

Gehen Sie gerade und achten Sie darauf, dass der Rollator so nah wie möglich an Ihrem Körper gehalten wird (E), um den richtigen Halt und die Sicherheit zu gewährleisten. Gehen Sie zwischen den Hinterrädern (F), nicht hinter ihnen (G).

Beachten Sie, dass der Rollator beim Bergabgehen schneller rollen kann als Sie gehen, so dass die Gefahr besteht, dass Sie stürzen. Betätigen Sie die Fahrbremsen, um die Geschwindigkeit anzupassen (B).

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie flatternde Röcke oder Hosen tragen, da sie sich in den Rädern verfangen könnten, was zu Stürzen führen könnte. Tragen Sie festes Schuhwerk, um Verletzungen zu vermeiden.

Aus Sicherheitsgründen ist es verboten, in öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Rollator zu sitzen. Lagern Sie Ihren Rollator sicher und stellen Sie sicher, dass die Feststellbremsen auf beiden Seiten betätigt sind (A).

Verwenden Sie den Rollator nicht auf rutschigen oder vereisten Oberflächen.

Halten Sie den Rollator von Feuer und heißen Gegenständen fern.

Klettern Sie nicht auf den Rollator.

3 Entfalten / Falten

Entfaltung: Lösen Sie die an den Sitzstangen positionierte Verriegelungsklemme (A). Drücken Sie die Sitzstangen nach unten und außen. Die Seitenrahmen gleiten auseinander. Drücken Sie die Sitzstangen (B) nach unten. Sie hören ein Klickgeräusch. Der Rollator ist nun in seiner offenen Position arretiert.

Falten: Ziehen Sie die Greifsnur am Sitz (C) und drücken Sie die Seitenrahmen zusammen. Verriegeln Sie die Klemme (D) über den Sitzstangen.

Tragen des Rollators: Der Rollator darf nicht am an der Greifsnur oder den Bremskabeln getragen werden. Falten Sie den Rollator zusammen, wie auf der Abbildung (E) gezeigt. Tragen Sie den Rollator an den Sitzstangen (F), wenn er zusammengeklappt ist.

4 Handgriffe / Memory-Funktion

Höhenverstellung: Ziehen Sie den Hebel (A) nach oben und stellen Sie das Griffrohr auf eine geeignete Höhe (B) ein. Lassen Sie den Hebel los und bewegen Sie das Griffrohr leicht auf und ab, bis ein Klick zu hören ist. Achten Sie darauf, dass der Hebel nach unten zeigt (C). Stellen Sie beide Griffe auf die gleiche Höhe ein, indem Sie die Skala auf beiden Seiten vergleichen. *Es wird empfohlen, die Handgriffe auf die gleiche Höhe wie Ihre Handgelenke einzustellen, wenn Ihre Arme neben Ihrem Körper hängen.*

Memory-Funktion: Bestimmen Sie die gewünschte Griffhöhe (siehe Skala). Zählen Sie die sichtbaren Löcher auf der Rückseite der Griffrohre. Lösen Sie die Schraube (D) oben an der Befestigung. Ziehen Sie den Hebel (A) nach oben und ziehen Sie das Rohr (E) aus dem Rahmen. Das Befestigungsteil (F) folgt nun dem Griffrohr. Verschieben Sie das Befestigungsteil (F) so, dass sich über ihm die zuvor gezählte Anzahl an Löchern befindet. Setzen Sie den roten Memory-Chip (G) in das erste verfügbare Loch unterhalb des Befestigungsteils (F) ein. Ziehen Sie den Hebel (A) nach oben und schieben Sie das Griffrohr (E) samt Befestigungsteil (F) wieder nach unten in den Seitenrahmen (H). Befestigen Sie die Schraube (D) wieder oben am Befestigungsteil. Ziehen Sie den Hebel (A) erneut nach oben, ziehen Sie den Griff ganz nach oben bis er stoppt und lassen Sie dann den Hebel los. Ab sofort stoppt der Griff in der voreingestellten Höhe, wenn er aus der untersten Position heraus nach oben gezogen wird.

5 Bremsen

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass die Bremsen funktionieren. Jeder Bremshebel (A) funktioniert an jedem der Hinterräder. *Fahren oder schieben Sie den Rollator nicht, während die Feststellbremsen aktiviert sind.*

Feststellbremsen: Drücken Sie beide Bremshebel (A) nach unten, bis sie blockieren. Beide Hinterräder sind nun gesperrt. Ziehen Sie beide Bremshebel nach oben, um die Feststellbremsen zu lösen.

Fahrbremsen: Ziehen Sie beide Bremshebel (B) nach oben, um die Geschwindigkeit zu drosseln. *Nicht kontinuierlich verwenden, während der Rollator in Bewegung ist.*

Einstellen / Prüfen: Lösen Sie die Mutter (C). Ziehen Sie das Bremskabel (D) mit der Einstellschraube (E) fest. Stellen Sie den Bremsblock (F) so ein, dass der Abstand zur inneren Trommelbremse ungefähr 1,5 mm beträgt, und ziehen Sie dann die Mutter (C) fest. Drehen Sie das Rad, um sicherzustellen, dass der Bremsblock das Rad nicht berührt.

Wartung: Reinigen Sie den Bremsblock (F) und die Bremsfeder (G) häufig. Die Räder und Bremsen können ausgetauscht werden, wenn sie abgenutzt oder beschädigt sind.

6 Abnehmbare Räder

Entfernen: Lösen Sie den Bremshebel. Drücken Sie den roten Knopf an der Nabe (A) nach unten und schieben Sie das Rad von der Achse (B), während Sie den Knopf weiterhin nach unten drücken.

Befestigung: Lösen Sie den Bremshebel. Schieben Sie das Rad auf die Achse (B). Drücken Sie das Rad so weit wie möglich nach innen auf die Achse, damit das Rad an der Achse einrastet. Sie hören ein «Klicken», wenn das Rad an Ort und Stelle ist. Das Rad ist sicher befestigt, wenn die Achse in der Mitte der Nabe (C) vollständig sichtbar ist. Ziehen Sie das Rad vorsichtig, um zu überprüfen, ob es sicher an der Achse befestigt ist. Nachdem das neue Rad am Rollator angebracht wurde, vergewissern Sie sich, dass die Bremsen ordnungsgemäß funktionieren. Stellen Sie sie bei Bedarf nach (siehe Abschnitt Bremsen). *Bitte beachten Sie, dass die Vorder- und Hinterräder unterschiedlich sind. Die Hinterräder haben einen Ring für die Innenbremse.*

7 Sitz

Der Rollator verfügt über einen sicheren und bequemen Netzsitz, durch den Sie beim Gehen einen freien Blick auf den Boden haben. Er kann bei Bedarf leicht mit einem Tuch abgewischt werden. Die Feststellbremsen müssen betätigt sein, bevor Sie den Sitz benutzen. Drücken Sie beide Bremshebel nach unten, bis sie einrasten (A). Beide Hinterräder sind nun gesperrt. Setzen Sie sich mit dem Rücken zur Einkaufstasche (B).

8 Kantenschutz / Kippfunktion

Kantenschutz: Der Kantenschutz (A), der sich vor den beiden Hinterrädern befindet, verhindert, dass sich die Hinterräder an Ecken, Türrahmen etc. verfangen.

Kippfunktion: Um die Kippfunktion zu nutzen, verwenden Sie die Vorderseite des Fußes und drücken Sie auf das Kippedal (B), das sich neben dem Hinterrad befindet. Dieses hilft, den Rollator über Schwellen, Kanten usw. zu neigen. Bitte beachten Sie: Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Bordsteine überqueren etc.

9 Einkaufstasche

Die Tasche fasst bis zu 10 Kilo und kann bei bis zu 60 °C schonend gewaschen werden.

Montage: Ziehen Sie die Feststellbremsen (A). Setzen Sie die Halterungen an der Tasche (B) auf die Tragegriffe des Rollators und drücken Sie die Halterungen nach unten. Bei richtiger Positionierung hören Sie ein Klickgeräusch. Stellen Sie sicher, dass das Bremskabel noch ungehindert am Rahmen entlangläuft (C).

Abnehmen: Ziehen Sie die Feststellbremsen an (A). Legen Sie Ihre Hände auf beiden Seiten an die Vorderseite der Tasche. Heben Sie die Tasche an und drücken Sie sie dabei leicht zusammen. Seien Sie vorsichtig, damit Sie sich nicht die Finger verletzen.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip bietet ergonomische Griff- und Auflageflächen. Die obere Vorderseite der Griffe bietet eine stabile Griffposition beim Aufstehen von einem Stuhl oder einer Couch. Stellen Sie immer sicher, dass die Feststellbremsen aktiviert sind, wenn Sie aus einer sitzenden Position aufstehen. Der ErgoGrip bietet auch im Stehen zusätzlichen Halt. Verwenden Sie immer die traditionelle Griffposition, um beim Gehen leichten Zugang zu den Fahrbremsen zu haben.

Transport

Der Rollator sollte in der gefalteten und verriegelten Position transportiert werden (siehe Absatz *Entfalten und Falten*). Stellen Sie sicher, dass die Verriegelungsklemme eingerastet ist, damit sich der Rollator nicht unbeabsichtigt entfalten kann. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rollator in ein Fahrzeug laden, und achten Sie darauf, ihn zu sichern. Der Rollator kann abgelegt werden, indem er am Rahmenrohr angehoben wird.

Lagerung

Der Rollator sollte in aufrechter Position gelagert werden. Wenn er im Freien gelagert wird, muss er zum Schutz abgedeckt werden. Lassen Sie Ihren Rollator nicht unbeaufsichtigt. Legen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Rollator.

Reinigung

Der Rollator kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Bei Schlamm- und Schmutzansammlungen können Sie ein Tuch mit einem milden Reinigungsmittel verwenden und anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen. Vermeiden Sie direkt gegen Kugellager (in Rädern und Vordergabeln) zu spülen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder Dampfstrahlgeräte. Trocknen Sie den Rollator mit einem weichen Tuch ab.

Desinfektion

Die Desinfektion darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder Ihr Sanitätshaus vor Ort. Während der Desinfektion ist eine ausreichende Schutzausrüstung zu tragen, und die Anweisungen des Desinfektionsmittelherstellers müssen befolgt werden. Die Oberfläche des Rollators sollte mit einem weichen Tuch oder Schwamm und einem zugelassenen chemischen Desinfektionsmittel, das 70–80 % Ethanol enthält, gereinigt werden. Wir raten von chlor- und phenolhaltigen Desinfektionsmitteln ab. *Der Hersteller kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch schädliche Desinfektionsmittel/-maßnahmen oder Desinfektion durch unbefugtes Personal verursacht wurden.*

Inspektion / Wartung / Wiederverwendung

Es wird empfohlen, regelmäßig eine Inspektion und Wartung durchzuführen (die Häufigkeit hängt davon ab, wie und wie oft der Rollator verwendet wird). Überprüfen Sie die folgenden Punkte: Rahmen, Schrauben, Handgriffe, Handgriffrohre, Bremsen, Bremsteile, Räder, Sitz und Zubehör. Dies gilt auch, wenn der Rollator für die Wiederverwendung vorbereitet werden soll. Bitte beachten Sie die detaillierten Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung zur Wartung der Bremsen und zur Reinigung / Desinfektion. Die empfohlene Wartung ist keine Anforderung und es ist keine vorbeugende Wartung erforderlich, sofern der Rollator gemäß dieser Gebrauchsanweisung bestimmungsgemäß verwendet wird.

Material / Wiederverwertung

Der Rollator besteht aus kunststoffbeschichteten Aluminiumrohren, Kunststoffkupplungen und Material aus Kunststoff und Polyester. In allen Rädern und Gabeln befinden sich Kugellager. Die meisten Rollatorteile können recycelt werden. Entsorgen Sie den Rollator und seine Verpackung gemäß den geltenden Vorschriften in Ihrem Land. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Behörden.

Garantie

Für den TOPRO Troja 5G wird eine Garantie von 7 Jahren auf Fehler- und Mängelfreiheit gewährt. Schäden durch unsachgemäße Verwendung oder Teile, die natürlichem Verschleiß ausgesetzt sind (z.B. Bremsblock, Bremskabel, Rad, Einkaufstasche, Sitz und Griff) sind von der 7-Jahres-Garantie ausgenommen. Für Reparaturen während der Garantiezeit wenden Sie sich bitte an Ihr örtliches Sanitätshaus oder Ihren Händler. Die Garantie erlischt, wenn nicht autorisierte Ersatzteile oder Zubehörteile auf dem Produkt verwendet wurden oder werden. Die erwartete Lebensdauer des Produkts wird auf 10 Jahre geschätzt, wenn es gemäß dieser Gebrauchsanweisung und ihren Sicherheits- und Wartungsanweisungen korrekt verwendet wird.

10 Produktetikett

- 1 - Hersteller
- 2 - Siehe Gebrauchsanweisung (blaues Symbol)
- 3 - Modellbezeichnung
- 4 - Modellnummer
- 5 - Herstellungsdatum
- 6 - Seriennummer
- 7 - Globale Handelsartikelnummer (GTIN)
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Maximales Benutzergewicht
- 10 - Maximale Länge des Rollators
- 11 - Maximale Breite / Höhe des Rollators
- 12 - Für den Innen- und Außenbereich bestimmt
- 13 - Medizinisches Gerät
- 14 - CE-Kennzeichnung (Dieses Produkt ist konform mit der Medizinprodukteverordnung (EU) 2017/745)

Gefeliciteerd met uw keuze voor een nieuwe TOPRO-rollator

Elk TOPRO-rollator wordt ontwikkeld, ontworpen en geproduceerd in Noorwegen. Het product voldoet aan de Medical Device Regulation (EU) 2017/745. Het is getest en goedgekeurd volgens EN ISO 11199-2:2021. Controleer bij ontvangst van de goederen uw product. Als u vragen heeft, neem dan onmiddellijk contact op met uw mobiliteitswinkel of dealer. Als u problemen ondervindt bij het lezen van deze gebruikershandleiding, is een digitale versie beschikbaar op topromobility.com.

Beoogd gebruik

De TOPRO Troja 5G biedt ondersteuning aan gebruikers met een verminderd evenwicht en/of verminderd loopvermogen. Het is ontworpen om te worden geduwd, niet getrokken. Het geïntegreerde zitje biedt de gebruiker de mogelijkheid om te rusten indien nodig. De beoogde gebruiker is een volwassene. Er gelden lengte- en gewichtsbependingen. *Contra-indicaties: Het product is niet geschikt voor personen met een weinig kracht in de armen, met een zeer slechte balans of met aanzienlijke cognitieve beperkingen. Het product is ontworpen en goedgekeurd voor gebruik binnen en buiten. Buiten is de rollator bedoeld als hulpmiddel bij het lopen op wegen en paden. Het is niet geschikt in ruw en/of steil terrein, noch voor trappen.*

Om de rollator te leren kennen en te leren hoe deze op de juiste manier te gebruiken, wordt training door een professional aanbevolen.

0 De grijs genummerde cirkels in deze gebruikershandleiding verwijzen naar de genummerde informatieafbeelding en illustraties in de omslag

1 Maak kennis met uw TOPRO-product

A Handvat	I Hendel voor hoogteverstelling
B Remhendel	J Boordschappentas
C Bel	K Zijframe
D Handvatbuis	L Stootrand
E Remkabel	M Remblok
F Bevestigingsstang voor zitje / Transporthandvat	N Drempeelhulp
G Fixatieklem	O Afneembare wielen
H Zitje met opklapkoord	P Productlabel

2 Veiligheid

Let er bij het opvouwen/uitvouwen van de rollator op dat u uw vingers niet bezeert.

Let op dat u uw vingers niet in open gaten of tussen stilstaande delen steekt.

Zorg ervoor dat de hendel voor het verstellen van de hoogte van de handgrepen stevig vergrendeld is.

Gebruik bij stilstaan of geparkeerd altijd de parkeerrem aan beide zijden (A).

Gebruik de rollator niet op trappen. Wees voorzichtig bij het passeren van stoepranden enz.

Controleer de remmen voor elk gebruik en controleer of de rollator in uitgevouwen positie is vergrendeld.

Gebruik de rollator niet om zware lasten of personen te vervoeren.

Houd er rekening mee dat sommige delen van de rollator warm of koud kunnen aanvoelen bij blootstelling aan extreme temperaturen.

Wijzig het product niet, omdat dit uw veiligheid in gevaar kan brengen en de garantie hierbij vervalt.

Voordat u op het zitje (C) gaat zitten, moet u ervoor zorgen dat de parkeerremmen aan beide zijden in vergrendelde stand (A) staan.

Om het risico van vallen te voorkomen, mag u niet zijwaarts of voorover leunen of buigen naar de achterkant van de rollator terwijl u in de zittende positie zit (D). Kantel de rollator niet te veel zijwaarts, om het risico op vallen te voorkomen. Om dezelfde reden mogen tassen e.d. nooit aan de handvatten worden gehangen.

Om de juiste ondersteuning en veiligheid te geven, loopt u rechtop en zorgt u ervoor dat de rollator zo dicht mogelijk bij uw lichaam wordt gehouden (E). Loop tussen de achterwielen (F), niet erachter (G).

Wees ervan bewust dat de rollator bergafwaarts sneller dan u kan gaan, waardoor u het risico loopt te vallen. Activeer de remmen om de snelheid (B) aan te passen.

Zeere lange of wijde kleding kan klem raken in de wielen van de rollator, wat kan leiden tot vallen. Het wordt daarom afgeraden zulke kleding te dragen tijdens het gebruik van de rollator. Draag stevig schoeisel om blessures te voorkomen.

Wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer wordt het ernstig afgeraden om op het zitje van de rollator te gaan zitten. Zet uw rollator vast door de parkeerremmen aan beide zijden te activeren (A).

Gebruik de rollator niet op gladde of ijzige oppervlakten.

Houd de rollator uit de buurt van vuur en hete voorwerpen.

Klim niet op de rollator.

3 Uitvouwen / Vouwen

Uitvouwen: Maak de fixatieklem los die zich op de bevestigingsstangen voor het zitje/netje (A) bevindt. Druk de bevestigingsstangen naar beneden en naar buiten. De zijframes schuiven uit elkaar. Druk de bevestigingsstangen (B) naar beneden. U hoort een klikkend geluid. De rollator zit nu vast in zijn open stand.

Vouwen: Trek aan het trekkoord op de zitting (C) en druk de zijframes tegen elkaar. Vergrendel de fixatieklem (D) over de bevestigingsstangen.

Het dragen van de rollator: De rollator mag niet worden gedragen bij de zitting of de remkabels. Vouw de rollator samen zoals weergegeven op de afbeelding (E). Draag de rollator bij de bevestigingsstangen voor het zitje/netje (F) wanneer neergeklapt.

4 Duwhandvatten / Geheugenfunctie

Hoogteverstelling: Trek de hendel (A) omhoog en stel de handgreepbuis (B) in op een geschikte hoogte. Laat de hendel los en beweeg de handgreepbuis lichtjes op en neer totdat u een klik hoort. Zorg ervoor dat de hendel naar beneden wijst (C). Stel beide handgrepen in op dezelfde hoogte door de schaalverdeling aan beide zijden te vergelijken. *Het wordt aanbevolen dat de duwstangen op dezelfde hoogte zijn ingesteld als uw polsen wanneer uw armen naast uw lichaam hangen.*

Geheugenfunctie: Bepaal de gewenste hoogte van de handgrepen (zie schaalverdeling). Tel de zichtbare gaten aan de achterkant van de handgreepbuizen. Schroef de schroef (D) bovenop het bevestigingsstuk los. Trek de hendel (A) omhoog en trek de buis (E) uit het frame. Het bevestigingsstuk (F) volgt nu de handgreepbuis. Verplaats het bevestigingsstuk (F) zodat het aantal gaten erboven gelijk is aan het eerder getelde aantal. Plaats de rode geheugenchip (G) in het eerste beschikbare gat onder het bevestigingsstuk (F). Trek de hendel (A) omhoog en duw de handgreepbuis (E) en het bevestigingsstuk (F) naar beneden en in het zijframe (H). Monteer de schroef (D) bovenop het bevestigingsstuk. Trek de hendel (A) omhoog en trek de handgreep omhoog totdat deze stopt, en laat vervolgens de hendel los. Voortaan, wanneer de handgrepen in de laagste positie staan, zullen ze stoppen in de vooraf ingestelde positie wanneer ze omhoog worden getrokken.

5 Remmen

Zorg ervoor dat de remmen werken voor elke gebruik van de rollator. Elk achterwiel werkt met zijn eigen remhendel (A). *Rijd of duw de rollator niet terwijl de parkeerremmen zijn geactiveerd!*

Parkeerremmen: Duw beide remhendels (A) naar beneden totdat ze vergrendelen. Beide achterwielen zijn nu vergrendeld. Knijp beide remhendels omhoog om de parkeerremmen los te laten.

Remmen: Trek beide remhendels (B) omhoog om de snelheid te verminderen. *Gebruik de remmen niet voortdurend terwijl u zich met de rollator voortbeweegt.*

Afstellen / controleren: Maak de moer los (C). Draai de remkabel (D) vast met de stelschroef (E). Stel de remblok (F) zo dicht mogelijk bij de trommel, ongeveer 1,5 mm en draai vervolgens de moer (C) vast. Laat het wiel draaien om te controleren dat de remblok het wiel niet raakt.

Onderhoud: Reinig het remblok (F) en de remveer (G) regelmatig. De wielen en remmen kunnen worden vervangen als ze versleten of beschadigd zijn.

6 Afneembare wielen

Verwijderen: Maak de remhendel los. Druk op de rode knop bij de naaf (A) en schuif het wiel van de as (B) terwijl u de knop ingedrukt houdt.

Bevestigen: Maak de remhendel los. Schuif het wiel op de as (B). Duw het wiel zo ver mogelijk naar binnen op de as om het wiel op de as te klikken. U hoort een "klik" als het wiel op zijn plaats zit. Het wiel zit stevig vast als de as in het midden van de naaf volledig zichtbaar is (C). Trek voorzichtig aan het wiel om te controleren of het stevig aan de as is bevestigd. Controleer nadat de wielen weer op de rollator zijn aangebracht of de remmen goed werken. Stel indien nodig de remmen opnieuw af (zie sectie Remmen). *Houd er rekening mee dat de voor- en achterwielen verschillend zijn. De achterwielen zijn voorzien van een remtandwiel voor het inwendige remsysteem.*

7 Zitting

De rollator heeft een veilige en handige doorkijkzitting, waardoor u tijdens het lopen zicht op de grond heeft. Het zitje kan gemakkelijk worden gereinigd met een doek indien nodig. De parkeerremmen moeten erop staan voordat u op het zitje gaat zitten. Duw beide remhendels naar beneden totdat ze vergrendelen (A). Beide achterwielen zijn nu vergrendeld. Ga met uw rug naar de boodschappentas (B) zitten.

8 Stootrand / Drempelhulpfunctie

Stootrand: De stootrand (A), die zich voor de achterwielen bevinden, bieden bescherming tegen uitstekende randen, deurstijlen enz.

Drempelhulp functie: Om de drempelhulp functie te gebruiken, gebruikt u de voorkant van de voet en drukt u op de drempelhulp (B), die zich naast het achterwiel bevindt. Deze helpt u om met de rollator drempels, stoepranden etc. te trotseren. Let op: Wees voorzichtig bij het passeren van stoepranden enz.

9 Boodschappentas

De boodschappentas is belastbaar tot 10 kg en kan voorzichtig schoongemaakt worden tot 60 °C.

Montage: Activeer de parkeerremmen (A). Plaats de beugels van de tas (B) op de bevestigingsstangen van de rollator en duw ze naar beneden totdat u een klikkend geluid hoort. Zorg ervoor dat de remkabel nog steeds vrij langs het frame loopt (C).

Verwijderen: Activeer de parkeerremmen (A). Plaats beide handen naar de voorzijde van de boodschappentas, elke hand op een zijde. Til de boodschappentas op terwijl u de tas een beetje bijeen drukt. Dit zorgt ervoor dat hij los komt. Gebruik altijd beide handen wanneer u deze handeling uitvoert.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip biedt een ergonomische grip en ondersteuning. De handgreep aan de voorkant van het handvat zorgt ervoor dat u een betere houvast heeft bij het opstaan vanuit een stoel of bank. Zorg er altijd voor dat de rollator op de parkeerrem staat bij het opstaan. De Ergogrip biedt ook extra steun als u bij de rollator staat. Wanneer u de rollator duwt dienen uw handen te allen tijde op de handvatten te rusten, zodat u snel bij de remmen kunt als dat nodig is.

Vervoer

De rollator moet in de gevouwen en vergrendelde positie worden vervoerd (zie paragraaf *Uitvouwen / Vouwen*). Zorg ervoor dat de fixatieklem vast zit, zodat de rollator niet onverwachts kan uitvouwen. Wees voorzichtig bij het laden van de rollator in een voertuig en let erop dat de rollator goed vergrendeld is. De rollator kan worden neergelegd door deze bij de framebuis op te tillen.

Opslag

De rollator moet rechtop worden opgeborgen. Als het buiten wordt opgeslagen, moet het onder een afdekking zijn om het te beschermen. Laat uw rollator niet onbeheerd achter. Leg geen zware voorwerpen op de rollator tijdens het opbergen.

Reiniging

De rollator kan worden gereinigd met een vochtige doek. In geval van modder- en vuilophoping kan een doek met een mild wasmiddel worden gebruikt, gevolgd door spoelen met lauw water. Vermijd spoelen direct tegen kogellagers (in wielen en voorvorken). Gebruik geen schuurmiddelen of stoomwas. Droog de rollator met een zachte doek.

Desinfectie

Desinfectie mag alleen worden uitgevoerd door bevoegd personeel. Neem contact op met uw lokale dealer of mobiliteitshulpcentrum. Tijdens de desinfectie moeten voldoende beschermingsmiddelen worden gedragen en moeten de instructies van de fabrikant van het ontsmettingsmiddel worden opgevolgd. Het oppervlak van de rollator moet worden gereinigd met een zachte doek of spons en een goedgekeurd chemisch ontsmettingsmiddel dat 70–80 % ethanol bevat. Wij raden af om een desinfectiemiddel dat chloor of fenol bevat af te keuren. *De fabrikant kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade of verwondingen die zijn opgetreden met behulp van schadelijk desinfectiemiddel/-methoden of desinfectie uitgevoerd door onbevoegd personeel.*

Inspectie / Onderhoud / Hergebruik

Het wordt aanbevolen om regelmatig inspectie en onderhoud uit te voeren (frequentie wordt bepaald door hoe en hoe vaak de rollator wordt gebruikt). Controleer de volgende items: Frame, schroeven, handgrepen, handvatbuizen, remmen, remonderdelen, wielen, zitje en accessoires. Dit geldt ook wanneer de rollator klaargemaakt moet worden voor hergebruik. Zie de gedetailleerde instructies in deze gebruikershandleiding over onderhoud van remmen en reiniging/desinfectie. Het aanbevolen onderhoud is geen vereiste en er is geen preventief onderhoud vereist, op voorwaarde dat de rollator wordt gebruikt zoals bedoeld volgens deze gebruikershandleiding.

Materiaal / Recycling

De rollator is gemaakt van aluminium buizen met een kunststof coating, kunststof koppelingen en materiaal van plastic en polyester. Er bevinden zich kogellagers in alle wielen en vorken. De meeste rollatoronderdelen kunnen worden gerecycled. Voer de rollator en de verpakking af volgens de geldende voorschriften in uw land. Neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Garantie

TOPRO Troja 5G is gegarandeerd vrij van fouten en defecten gedurende 7 jaar. Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of onderdelen die zijn blootgesteld aan natuurlijke slijtage (bijv. remblok, remkabel, wiel, boodschappentas, zitje en handvat) zijn vrijgesteld van de garantie van 7 jaar. Neem voor reparaties tijdens de garantieperiode contact op met uw lokale mobiliteitswinkel of dealer. De garantie vervalt als er ongeautoriseerde reserveonderdelen of accessoires op het product zijn of worden gebruikt. De verwachte levensduur van het product wordt geschat op 10 jaar als het op de juiste manier wordt gebruikt volgens deze gebruikershandleiding en de veiligheids- en onderhoudsinstructies.

10 Productlabel

- 1 - Fabrikant
- 2 - Raadpleeg de gebruiksaanwijzing (blauw pictogram)
- 3 - Modelnaam
- 4 - Modelnummer
- 5 - Datum van vervaardiging
- 6 - Serienummer
- 7 - Nummer van de wereldhandelspost
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Maximaal gebruikersgewicht
- 10 - Maximale lengte van de rollator
- 11 - Maximale breedte / hoogte van de rollator
- 12 - Bedoeld voor gebruik binnen en buiten
- 13 - Medisch hulpmiddel
- 14 - CE-markering (Dit product voldoet aan richtlijn medische hulpmiddelen (EU) 2017/745)

Accessoires

	TOPRO Item No.
Rugsteun inclusief polstering, 67 cm	815270
Rugsteun inclusief polstering, 75 cm	815272
Dienblad	814728
Antislipmat voor dienblad	814059
Stokhouder, zwart	814040
Bidonhouder, zwart	814043
LED-lampje met klip en USB-contact	815260
Paraplu met bevestiging, zwart	814068
Eenzijdige beremming	814026
Duwhandgreep voor begeleider	814014
Tas met rits	814046
Naamplaatje	814024
Rolweerstandssysteem, paar	814038
Transporttas	814042
Zuurstoffleshouder (alleen samengeperst, niet vloeibaar)	814009
High profile soft wielen, set met 4 wielen	815302
High profile soft achterwielen met spikes, paar	815331

Accessoires gemonteerd op de rollator kunnen de stabiliteit beïnvloeden, daarom raden wij u aan om ze met zorg te gebruiken. Accessoires kunnen afzonderlijk worden besteld om TOPRO Troja 5G aan te passen aan individuele behoeften. Neem contact op met uw mobiliteitswinkel, dealer of TOPRO voor een bijgewerkt overzicht van beschikbare accessoires of bezoek onze homepage topromobility.com.

Grattis till ditt val av ny TOPRO-rollator

Varje TOPRO-rollator är utvecklad, konstruerad och tillverkad i Norge. Produkten uppfyller förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745. Den är testad och godkänd enligt EN ISO 11199-2:2021. Kontrollera din produkt vid mottagandet av varorna. Om du har några frågor, vänligen kontakta din hjälpmedelscentral eller återförsäljare omedelbart. Om du har problem med att läsa den här användarhandboken finns en elektronisk version tillgänglig på topromobility.com.

Avsedd användning

TOPRO Troja 5G ska ge stöd till användare med nedsatt balans och/eller nedsatt gångförmåga. Den är utformad för att skjutas framåt, inte dras. Den integrerade sitsen ger användaren möjlighet att vila vid behov. Rollatorn är avsedd för vuxna. Längd- och viktbegränsningar gäller. *Kontraindikationer: Produkten är inte lämplig för personer med svag styrka i armarna, med mycket dålig balans eller med betydande kognitiva funktionshinder. Produkten är designad och godkänd för både inomhus- och utomhusbruk. Utomhus är rollatorn avsedd att vara ett hjälpmedel för promenader på vägar och stigar. Den är inte lämplig i grov och/eller brant terräng, inte heller för trappor.*

För att lära känna rollatorn och lära sig att använda den på rätt sätt rekommenderas en introduktion av din fackhandlare/hjälpmiddelscentral.

0 De grå numrerade cirkelarna i denna bruksanvisning refererar till numrerade illustrationer inuti omslaget

1 Lär känna din TOPRO-produkt

A Handtag	I Spak för höjdjustering
B Bromshandtag	J Shoppingväska
C Ringklocka	K Sidoram
D Handtagsrör	L Kantskydd
E Bromsvajer	M Bromskloss
F Sitsstänger / Bärhandtag	N Steghjälp
G Låsklämma	O Avtagbara hjul
H Sits med rem för fällmekanism	P Produktetikett

2 Säkerhet

När du fäller ut/ihop rollatorn, var försiktig så att du inte skadar fingrarna.

Var försiktig så att du inte fastnar med fingrarna i öppna hål eller mellan stationära delar.

Se till att spaken för justering av handtagens höjd är korrekt åtdragen.

Aktivera alltid parkeringsbromsen (A), på båda sidor, vid stopp eller parkering.

Använd inte rollatorn i trappor. Var försiktig när du passerar trottoarkanter och liknande.

Kontrollera bromsarna före varje användning och att rollatorn låser sig i utfällt läge.

Använd inte rollatorn för att transportera tung last eller personer.

Tänk på att vissa delar av rollatorn kan kännas varma eller kalla när de utsätts för extrema temperaturer.

Modifiera inte produkten eftersom detta kan riskera din säkerhet och garantin blir ogiltig.

Innan du sätter dig på sitsen (C), se till att parkeringsbromsarna på båda sidor är aktiverade (A).

För att undvika risk för fall, luta eller böj dig inte i sidled eller bakåt medan du sitter (D). Luta inte rollatorn för mycket i sidled för att undvika risken för fall. Av samma anledning får påsar etc. aldrig hängas på handtagen.

För rätt stöd och säkerhet, gå upprätt och se till att rollatorn hålls så nära kroppen som möjligt (E). Gå mellan bakhjulen (F), inte bakom dem (G).

Tänk på att rollatorn kan rulla snabbare än du när du går i nedförsbacke, vilket kan göra att du riskerar att falla. Aktivera färd-bromsen för att justera hastigheten (B).

Var försiktig när du bär fladdrande kjolar eller byxor eftersom de kan fastna i hjulen, vilket kan leda till fall. Använd robusta skor för att undvika skador.

Av säkerhetsskäl är det förbjudet att sitta på rollatorn under resor med kollektivtrafik. Förvara rollatorn på ett säkert sätt och se till att parkeringsbromsarna på båda sidor är aktiverade (A).

Använd inte rollatorn på hala eller isiga ytor.

Håll rollatorn borta från eld och heta föremål.

Klättra inte på rollatorn.

3 Utfällning / Hopfällning

Utfällning: Lossa låsklämman som är placerad på sitsstängerna (A). Tryck ner och ut sitsstängerna. Sidoramarna glider isär. Tryck ner sitsstängerna (B) tills du hör ett klickljud. Rollatorn är nu låst i utfällt läge.

Hopfällning: Dra i remmen på sitsen (C) och tryck ihop sidoramarna. Lås klämman (D) över sitsstängerna.

Bära rollatorn: Rollatorn får inte bäras i sitsremmen eller bromsvajrarna. Fäll ihop rollatorn enligt illustrationen (E). Bär rollatorn i sitsstängerna (F) när rollatorn är hopfälld.

4 Handtag / Minnesfunktion

Höjdjustering: Dra spaken (A) uppåt och justera handtagsröret (B) till önskad höjd. Släpp spaken och rör handtagsröret lätt upp och ner tills du hör ett klick. Se till att spaken är nedåt (C). Justera båda handtagen till samma höjd genom att jämföra nummerskalan på båda sidorna. *Vi rekommenderar att handtagen är inställda på samma höjd som handlederna när armarna hänger rakt ner längs kroppen.*

Minnesfunktion: Bestäm önskad höjd för handtagen (se nummerskalan). Räkna de synliga hålen på baksidan av handtagsrören. Skruva loss skruven (D) ovanpå fästdelen. Dra spaken (A) uppåt och dra ut röret (E) ur ramen. Fästdelen (F) följer nu med handtagsröret. Flytta fästdelen (F) så att antalet hål ovanför motsvarar det tidigare räknade antalet. Sätt in det röda minneschipet (G) i det första lediga hålet under fästdelen (F). Dra spaken (A) uppåt och tryck ner handtagsröret (E) och fästdelen (F) i sidramen (H). Skruva fast skruven (D) igen ovanpå fästdelen. Dra spaken (A) uppåt, dra upp handtaget tills det stannar och släpp sedan spaken. Hädanefter kommer handtaget att stanna i det förinställda läget när det dras upp från det nedersta läget.

5 Bromsar

Se till att bromsarna fungerar före varje färd. Vardera bromshandtag (A) fungerar på vart och ett av bakhjulen. *Rollatorn ska inte köras eller skjutas framåt när parkeringsbromsarna är aktiverade.*

Parkeringsbromsar: Tryck båda bromshandtagen (A) nedåt tills de låser sig. Båda bakhjulen är nu låsta. Dra båda bromshandtagen uppåt för att lossa parkeringsbromsarna.

Färdbromsen: Dra båda bromshandtagen (B) uppåt för att sänka hastigheten. *Använd inte kontinuerligt när rollatorn är i rörelse.*

erligt när rollatorn är i rörelse.

Justering / kontroll: Lossa muttern (C). Dra åt bromsvajern (D) med justerings-skruven (E). Justera bromsklossen (F) så avståndet till den inre bromstrumman är ca 1,5 mm och dra sedan åt muttern (C). Snurra på hjulet för att kontrollera att bromsklossen inte vidrör hjulet.

Underhåll: Rengör bromsklossen (F) och bromsfjädern (G) regelbundet. Hjulen och bromsarna kan bytas ut om de är utslitna eller skadade.

6 Avtagbara hjul

Borttagning: Frigör bromsarna. Tryck ner den röda knappen på navet (A) och dra av hjulet från axeln (B) medan du trycker ner knappen.

Montering: Frigör bromsarna. Montera hjulet på axeln (B). Dra hjulet så långt som möjligt inåt på axeln för att få hjulet att snäppa på axeln. Du kommer att höra ett "klick" när hjulet är på plats i låst position. Hjulet är ordentligt fastsatt när axeln är helt synlig i mitten av navet (C). Dra försiktigt i hjulet för att kontrollera att det är ordentligt fastsatt på axeln. Se till att bromsarna fungerar korrekt när det nya hjulet har monterats på rollatorn. Justera dem om det behövs (*se avsnittet Bromsar*). *Observera att fram- och bakhjulen är olika. Bakhjulen har en ring för invändig broms.*

7 Sits

Rollatorn har en säker och bekväm nätsits, genom vilken du har utsikt mot marken medan du går. Den kan enkelt torkas av med en trasa om det behövs. Parkeringsbromsarna måste aktiveras innan du använder sitsen. Tryck båda bromshandtagen nedåt tills de låser (A). Båda bakhjulen är nu låsta. Sitt med ryggen mot väskan (B).

8 Kantskydd / Steghjälp

Kantskydd: Kantskydden (A), som är framför bakhjulen, hindrar bakhjulen från att fastna i hörn, dörrkarmar etc.

Steghjälp: För att använda steghjälpen placerar du främre delen av foten på pedalen (B), som befinner sig bredvid bakhjulet, och pressar pedalen nedåt. Detta hjälper till att luta rollatorn över trösklar, kanter etc. Observera: Var försiktig när du passerar trottoarkanter och liknande.

9 Shoppingväska

Väskan tål last upp till 10 kilo och kan tvättas försiktigt vid upp till 60 °C.

Montering: Aktivera parkeringsbromsarna (A). Placera väskans fästen (B) på rollatorns bärhandtag och tryck dem nedåt. När väskan är rätt placerad hör du ett klickljud. Se till att bromsvajern fortfarande går obehindrad längs ramen (C).

Borttagning: Aktivera parkeringsbromsarna (A). Placera händerna på främre delen av väskans fästen, på båda sidor. Lyft upp väskan samtidigt som du trycker ihop den något. Var försiktig så att du inte skadar fingrarna.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip erbjuder ergonomiska grepp och stödytor. Handtagens övre framsida ger en stadig greppposition när du reser dig upp från en stol eller soffa. Se alltid till att parkeringsbromsarna är aktiverade när reser dig upp från sittande läge. ErgoGrip erbjuder också extra stöd när du står upp. Använd alltid det traditionella greppläget när du går, för enkel åtkomst till körbromsarna.

Transport

Rollatorn ska transporteras i hopfälld och låst läge (se avsnittet *Utfällning/ Hopfällning*). Se till att låsklämman är fastsatt, så att rollatorn inte kan fällas ut oavsiktligt. Var försiktig när du lastar in rollatorn i ett fordon och var uppmärksam på att säkra den. Rollatorn kan läggas ner genom att lyfta den i ramröret.

Lagring

Rollatorn ska förvaras stående. Om den förvaras utomhus bör den täckas över för att skyddas. Lämna inte rollatorn utan uppsikt. Lagg inte tunga föremål ovanpå rollatorn under förvaring.

Rengöring

Rollatorn kan rengöras med en fuktig trasa. Vid ansamling av lera och smuts kan en trasa med ett mildt tvättmedel användas följt av sköljning med ljummet vatten. Undvik att spola direkt mot kullager (i hjul och framgafflar). Använd inte slipmedel eller ångtvätt. Torka rollatorn med en mjuk trasa.

Desinfektion

Desinfektion får endast utföras av behörig personal. Kontakta din lokala återförsäljare eller din hjälpmedelscentral. Under desinfektion måste tillräcklig skyddsutrustning bäras och instruktionerna från desinfektionsmedelstillverkaren måste följas. Rollatorns yta ska rengöras med en mjuk trasa eller svamp och ett godkänt kemiskt desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel som innehåller klor eller fenol.

Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för fel eller skador som uppstått med skadligt desinfektionsmedel/-metoder eller desinfektion som utförts av obehörig personal.

Inspektion / Underhåll / Återanvändning

Det rekommenderas att inspektion och underhåll utförs regelbundet (frekvensen bestäms av hur och hur ofta rollatorn används). Kontrollera följande: Ram, skruvar, handtag, handtagsrör, bromsar, bromsdelar, hjul, sits och tillbehör. Detta gäller även när rollatorn ska förberedas för återanvändning. Se detaljerade instruktioner i denna bruksanvisning om underhåll av bromsar och rengöring/desinfektion. Rekommenderat underhåll är inte ett krav och inget förebyggande underhåll krävs förutsatt att rollatorn används som avsett enligt denna bruksanvisning.

Material / Återvinning

Rollatorn är tillverkad av plastbelagda aluminiumrör, plastkopplingar och material av plast och polyester. Det finns kullager i alla hjul och gafflar. De flesta rollatordelar kan återvinnas. Kassera rollatorn och dess förpackning enligt gällande bestämmelser i ditt land. För information, vänligen kontakta dina myndigheter.

Garanti

TOPRO Troja 5G är garanterat fri från fel och defekter i 7 år. Skador som orsakas av felaktig användning eller delar som utsätts för naturligt slitage (t.ex. bromskloss, bromsvajer, hjul, väska, sits och handtag) är undantagna från 7 års garanti. För reparationer under garantiperioden, vänligen kontakta din lokala hjälpmedelscentral eller återförsäljare. Garantin är ogiltig om otillåtna reservdelar eller tillbehör har använts eller används på produkten. Produktens förväntade livslängd uppskattas till 10 år om den används på rätt sätt enligt denna bruksanvisning och dess säkerhets- och underhållsinstruktioner.

10 Produktetikett

- 1 - Tillverkare
- 2 - Se bruksanvisningen (blå ikon)
- 3 - Modellnamn
- 4 - Modellnummer
- 5 - Tillverkningsdatum
- 6 - Serienummer
- 7 - Artikelnummer för global handel (GTIN-kod)
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Maximal användarvikt
- 10 - Maximal längd på rollatorn
- 11 - Maximal bredd/höjd på rollatorn
- 12 - Avsedd för inomhus- och utomhusbruk
- 13 - Medicinteknisk produkt
- 14 - CE-märke (Denna produkt uppfyller förordningen om medicintekniska produkter (EU) 2017/745)

Tillbehör

	TOPRO Art. Nr.
Ryggstöd med stoppning, 67 cm	815270
Ryggstöd med stoppning, 75 cm	815272
Bricka	814728
Antihalkmatta för bricka	814059
Käpphållare, svart	814040
Flaskhållare, svart	814043
LED-lampa med clip-on och USB-kontakt	815260
Paraply med fäste, svart	814068
Enhandsbroms	814026
Styrhandtag för synskadade	814014
Bakre väska med dragkedja	814046
Namnskylt	814024
Släpbroms (Rullmotståndssystem), par	814038
Transportväska	814042
Korg för syrgasflaska (endast komprimerad, inte flytande)	814009
Terränghjul, 4 stk	815302
Dubbdäck, 2 bakhjul	815331

Tillbehör monterade på rollatorn kan påverka stabiliteten, vi rekommenderar därför att du använder dem försiktigt. Tillbehör kan beställas separat så att TOPRO Troja 5G kan anpassas efter individuella behov. Kontakta din hjälpmedelscentral, återförsäljare eller TOPRO för en uppdaterad översikt över tillgängliga tillbehör eller besök vår hemsida topromobility.com.

Tillykke med dit valg af den nye TOPRO-rollator

Hver TOPRO-rollator er udviklet, designet og fremstillet i Norge. Produktet overholder EU's forordning (EU) 2017/745 for medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne. Det er desuden testet og godkendt iht. EN ISO 11199-2:2021. Når du har modtaget rollatoren, beder vi dig tjekke, om alt er i orden. Har du spørgsmål, beder vi dig kontakte din mobilitetsbutik eller forhandler. Har du problemer med at læse denne brugervejledning, kan du se den online på topromobility.com.

Brugen af produktet

TOPRO Troja 5G er beregnet til at yde støtte til brugere med nedsat balanceevne og/eller gangfunktion. Den er beregnet til at blive skubbet, ikke trukket. Det integrerede sæde giver brugeren mulighed for at hvile, hvis det er nødvendigt. Rollatoren er til voksne brugere. Der er begrænsninger mht. brugerens højde og vægt. *Kontraindikationer: Produktet er ikke egnet til personer med dårlig styrke i armene, med meget dårlig balance eller med betydelige kognitive handicap. Produktet er designet og godkendt til inden- og udendørs brug. Udendørs rollator er beregnet til at være en hjælp til at gå på veje og stier. Det er ikke egnet i ujævnt og / eller stejlt terræn eller til brug på trapper.*

For at lære rollatoren bedre at kende og bruge den korrekt anbefaler vi undervisning og vejledning af en fagperson.

0 Tallene i de grå cirkler refererer til den nummererede grafik og til illustrationerne, som du finder inde i omslaget

1 Lær dit TOPRO-produkt at kende

A	Håndtag	I	Håndtag til justering af håndtagets højde
B	Bremsegreb	J	Indkøbstaske
C	Ringeklokke	K	Sideramme
D	Rør til håndtag	L	Kantbeskytter
E	Bremsekabel	M	Bremseklods
F	Håndtagsrør / Bærehåndtag	N	Vippefunktion
G	Låseclips	O	Aftagelige hjul
H	Sæde med rem til foldemekanisme	P	Produktmærke

2 Sikkerhed

Pas på dine fingre, når du klapper rollatoren sammen, eller folder den ud.

Sæt ikke at sætte fingrene i åbne huller eller mellem faste dele.

Sørg for, at håndtagene til højdejustering er placeret nedad.

Når du holder stille eller parkeret skal du altid aktivere parkeringsbremsene på begge sider (A).

Brug ikke rollatoren på trapper. Vær forsigtig, når du passerer kantsten og lignende.

Kontroller bremsene før brug hver gang, og at rollatoren er låst i udfoldet position.

Brug ikke rollatoren til at transportere meget tunge ting eller personer.

Vær opmærksom på, at nogle dele af rollatoren kan føles varme eller kolde, når de udsættes for ekstreme temperaturer.

Du må ikke ændre produktet, det kan bringe din sikkerhed i fare, og garantien bliver ugyldig.

Før du sidder på sædet (C), skal du sørge for at parkeringsbremsene på begge sider er aktiveret (A).

For at undgå risikoen for at falde må du ikke læne dig eller bøje dig sidelæns eller over mod bagsiden af rollatoren,

mens du sidder på den (D). Rollatoren må ikke vippes for meget sidelæns. Af samme grund må poser og lign. aldrig hænges på håndtagene.

For at give den rette støtte og sikkerhed skal du gå lige og sørge for, at rollatoren holdes så tæt på kroppen som muligt (E). Gå mellem baghjulene (F), ikke bag dem (G).

Vær opmærksom på, at rollatoren kører hurtigere end dig, når du går ned ad bakke, hvilket kan føre til fald. Brug kørebremsen for at justere hastigheden (B).

Vær forsigtig, hvis du har flagrende bukser eller nederdele på, da de kan blive fanget i hjulene, hvilket kan føre til et fald. Brug robust fodtøj for at undgå skader.

Af sikkerhedsmæssige årsager er det forbudt at sidde på rollatoren under offentlig transport. Opbevar rollatoren sikkert, og sørg for, at parkeringsbremsene på begge sider er aktiveret (A).

Brug ikke rollatoren på glatte eller iskolde overflader.

Hold rollatoren væk fra ild og varme genstande.

Kravl ikke op på rollatoren.

3 At folde ud og sammen

At folde ud: Åbne låseclipsen, der er placeret ved håndtagsrørene (A). Tryk håndtagsrørene ned og ud. Siderammerne glider fra hinanden. Tryk håndtagsrørene ned (B) til du hører et klik. Rollatoren er nu låst i brugsposition.

At folde sammen: Træk i stroppen på sædet (C) og tryk siderammerne sammen. Lås clipsen (D) over håndtagsrøret.

Transport af rollatoren: Rollatoren må ikke bæres i sædestroppen eller bremsekablerne. Fold rollatoren sammen som vist på illustrationen (E). Bær rollatoren ved håndtagsrørene (F), når den er sammenfoldet.

4 Håndtag / Memoryfunktion

Højdejustering: Træk håndtaget (A) opad og juster håndtagsrøret (B) til en passende højde. Slip håndtaget og bevæg håndtagsrøret let op og ned, indtil du hører et klik. Sørg for, at håndtaget peger nedad (C). Juster begge håndtag til samme højde ved at sammenligne talskalaen på hver side. *Det anbefales, at håndtagene er indstillet til samme højde som dine håndled, når dine arme hænger langs kroppen.*

Memoryfunktion: Bestem højden på håndtagene (se talskala). Tæl synlige huller på bagsiden af håndtagsrørene. Skru skruen (D) øverst på fastgørelsesstykket løs. Træk håndtaget (A) opad og træk røret (E) ud af rammen. Fastgørelsesstykket (F) vil nu følge håndtagsrøret. Flyt fastgørelsesstykket (F), så antallet af huller over det svarer til de tidligere talte huller. Sæt den røde hukommelseschip (G) i det første tilgængelige hul under fastgørelsesstykket (F). Træk håndtaget (A) opad og skub håndtagsrøret (E) og fastgørelsesstykket (F) nedad og ind i siderammen (H). Monter skruen (D) øverst på fastgørelsesstykket. Træk håndtaget (A) opad og træk håndtaget op, indtil det stopper, og slip derefter håndtaget. Fra nu af vil håndtagene stoppe i den forudindstillede position, når de trækkes op fra nederste position.

5 Bremses

Sørg for hver tur for, at bremserne virker. Bremsegrebene (A) virker på deres respektive baghjul. *Du må ikke køre eller skubbe rollatoren, mens parkeringsbremsene er aktiveret!*

Parkeringsbremses: Skub begge bremsegreb (A) ned, indtil de låses. Begge baghjul er nu låst. Skub begge bremsegreb opad for at frigøre parkeringsbremsene.

Kørebremser: Træk begge brem-

segreb (B) opad for at reducere hastigheden. *Brug ikke kontinuerligt, mens rollatoren er i bevægelse.*

Justering/kontrol: Løsn møtrikken (C). Bremsekablet (D) strammes med justeringsskruen (E). Juster bremseblokken (F), så afstanden til den indvendige tromlebremse er ca. 1,5 mm, og stram derefter møtrikken (C). Drej hjulet rundt for at kontrollere, at bremseblokken ikke rører hjulet.

Vedligeholdelse: Rengør bremseklodsen (F) og bremsefjederen (G) ofte. Hjul og bremses kan udskiftes, hvis de er slidte eller beskadigede.

6 Aftagelige hjul

Fjernelse: Løsn bremsehåndtaget. Tryk ned for den røde knap på navet (A), og skub hjulet af akslen (B), mens du stadig trykker knappen ned.

Fastgørelse: Løsn bremsehåndtaget. Skub hjulet til akslen (B). Skub hjulet så langt som muligt indad på akslen for at få hjulet til at sidde fast. Du vil høre et «klik», når hjulet er på plads. Hjulet er forsvarligt fastgjort, når akslen er helt synlig midt i navet (C). Træk forsigtigt i hjulet for at kontrollere, at det er forsvarligt fastgjort til akslen. Når det nye hjul er påført rollatoren, skal du sørge for, at bremsene fungerer korrekt. Juster dem om nødvendigt (se afsnit *Bremses*). *Bemærk, at for- og baghjulene er forskellige. Baghjulene har en ring til indvendig bremsning.*

7 Sæde

Rollatoren har et sikkert og bekvemt netsæde, hvorigennem du har udsigt til underlaget, mens du går. Det kan nemt tørres med en klud, hvis det er nødvendigt. Parkeringsbremsene skal være aktiveret, før sædet tages i brug. Skub begge bremsegreb nedad, indtil de låser (A). Begge baghjul er nu låst. Sid med ryggen mod tasken (B).

8 Kantbeskytter / Vippefunktion

Kantbeskytter: Kantbeskytterne (A), som er foran baghjulene, forhindrer baghjulene i at fange hjørner, mørkarme osv.

Vippefunktion: Hvis du vil bruge vippefunktionen, skal du bruge fodens forside og trykke ned på vippepedalen (B), som er ved siden af baghjulet. Dette hjælper dig med at vippe rollatoren over dørtrin og kanter mv. Bemærk: Vær forsigtig, når du passerer kantsten og lignende.

9 Tasken

Tasken rummer op til 10 kilo og kan vaskes op til 60 °C.

Montering: Aktivér parkeringsbremsene (A). Anbring beslagene på posen (B) på rollatorens bærehåndtag og skub dem nedad. Når du er placeret korrekt, vil du høre en klikkende lyd. Sørg for, at bremsekablet stadig kører uhindret langs rammen (C). **Fjernelse:** Aktivér parkeringsbremsene (A). Placer hænderne mod forsiden af tasken, på begge sider. Løft tasken op, mens du trykker lidt sammen. Vær opmærksom på, så du ikke skader dine fingre.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip tilbyder ergonomiske grebs- og støtteflader. Den øverste front af håndtagene giver stabil greb position, når du kommer op fra en stol eller sofa. Sørg altid for, at parkeringsbremsene er aktiveret, når du rejser dig fra siddende stilling. ErgoGrip giver også ekstra støtte, mens du står. Brug altid den traditionelle grebposition for nem adgang til kørebremserne, mens du går.

Transport

Rollatoren bør transporteres i sammenfoldet, låst position (se afsnit *At folde ud og sammen*). Sørg for, at låseklemmen er fastgjort, så rollatoren ikke kan folde sig utilsigtet ud. Vær forsigtig, når du lægger rollatoren ind i et køretøj, og vær opmærksom på at fastgøre den. Rollatoren kan lægges ned ved at løfte den i rammerøret.

Opbevaring

Rollatoren skal opbevares i opretstående stilling. Hvis den opbevares udendørs, skal den være under et beskyttende cover. Lad ikke rollatoren være uden opsyn. Læg ikke tunge genstande oven på rollatoren under opbevaring.

Rengøring

Rollatoren kan rengøres med en fugtig klud. I tilfælde af ophobning af mudder og snavs kan en klud med et mildt vaske-middel anvendes efterfulgt af skylning med lukket vand. Undgå at skylle direkte mod kuglelejer (i hjul og forgafler). Brug ikke slibemidler eller dampvask. Tør rollatoren med en blød klud.

Desinfektion

Desinfektion må kun udføres af autoriseret personale. Kontakt din lokale forhandler eller dit mobilitetshjælpe-middelcenter. Under desinfektion skal der bæres tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr, og desinfektionsmiddelproducentens anvisninger skal følges. Rollatorens overflade skal rengøres med en blød klud eller svamp og et godkendt kemisk desinfektionsmiddel indeholdende 70–80 % ethanol. Vi fraråder desinfektionsmiddel, der indeholder klor eller phenol. *Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader eller skader, der opstår ved hjælp af skadeligt desinfektionsmiddel/-metoder eller desinfektion udført af uautoriseret personale.*

Eftersyn / Vedligeholdelse / Genanvendelse

Vi anbefaler at udføre eftersyn og vedligeholdelse udføres regelmæssigt (hyppigheden bestemmes af, hvordan og hvor ofte rollatoren bruges). Kontroller følgende: Ramme, skruer, håndtag, håndtagenes rør, bremses, bremsedele, hjul, sæde og tilbehør. Det gælder også, når rollatoren skal forberedes til andre brugere. Se detaljerede instruktioner i denne brugervejledning om service på bremses samt rengøring/desinfektion. Den anbefalede vedligeholdelse er ikke et krav, og der kræves ingen forebyggende vedligeholdelse, hvis rollatoren bruges efter hensigten i henhold til denne vejledning.

Materiale / Genbrug

Rollatoren er produceret af plastbelagte aluminiumsrør, plastkoblinger og materiale lavet af plast og polyester. Der er kuglelejer i alle hjul og gafler. De fleste rollatordele kan genbruges. Bortskaf rollatoren og dens emballage, når det bliver nødvendigt, i henhold til de gældende regler i dit land. Kontakt dine offentlige myndigheder for uddybende oplysninger.

Garanti

TOPRO Troja 5G er garanteret fri for fejl og mangler i 7 år. Skader forårsaget af forkert brug eller dele, der udsættes for naturlig slitage (f.eks. bremseklodser og -kabler, hjul, taske, sæde og håndtag), er undtaget fra 7 års garanti. For reparation i garantiperioden skal du kontakte din lokale mobilitetsbutik eller forhandler. Garantien bortfalder, hvis der er anvendt uautoriserede reservedele eller tilbehør til produktet. Produktets forventede levetid anslås til at være 10 år, hvis det anvendes korrekt i henhold til denne brugervejledning samt dens sikkerheds- og vedligeholdelsesinstruktioner.

10 Produktmærke

- 1 - Fabrikant
- 2 - Se brugsanvisningen (blåt ikon)
- 3 - Modelnavn
- 4 - Modelnummer
- 5 - Fremstillingsdato
- 6 - Serienummer
- 7 - Varenummer til global handel
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Maksimal brugervægt
- 10 - Maksimal længde på rollator
- 11 - Maksimal bredde/højde på rollator
- 12 - Beregnet til inden- og udendørs brug
- 13 - Medicinsk udstyr
- 14 - CE-mærkning (Dette produkt er i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr)

Tilbehør

	TOPRO Item No.
Rygstøtte med polstring, 67 cm	815270
Rygstøtte med polstring, 75 cm	815272
Bakke	814728
Skridsikker måtte til bakke	814059
Stokkeholder, sort	814040
Flaskeholder, sort	814043
LED-lampe med clip-on og USB-stik	815260
Paraply med fastgørelse, sort	814068
Enhåndsbremse	814026
Styrehandtag til synshandicappede	814014
Bagtaske med lynlås	814046
Navneskilt	814024
Slæbebremse (Rullemodstandssystem), par	814038
Transporttaske	814042
Kurv til iltflaske (kun komprimeret, ikke flydende)	814009
Terrængående hjul, sæt med fire	815302
Pigdæk, 2 baghjul	815331

Tilbehør monteret på rollatoren kan påvirke stabiliteten. Vi anbefaler derfor at bruge dem med omhu. Tilbehør kan bestilles separat, så rollatoren kan tilpasses individuelle behov. Kontakt din mobilitetsbutik, forhandler eller TOPRO for at få et opdateret overblik over tilgængeligt tilbehør, eller besøg vores hjemmeside topromobility.com.

Onnittelut uuden TOPRO-rollaattorin valinnasta

Jokainen TOPRO-rollaattori on kehitetty, suunniteltu ja valmistettu Norjassa. Tuote on ilmoitettu lääkinnällisten laitteiden asetuksen (EU) 2017/745 mukaiseksi. Se on testattu ja hyväksytty standardin EN ISO 11199-2:2021 mukaisesti. Kun olet vastaanottanut tavarat, tarkista tuotteesi. Jos sinulla on kysyttävää, ota välittömästi yhteyttä jälleenmyyjään. Jos sinulla on ongelmia tämän käyttöohjeen lukemisessa, sähköinen versio on saatavana osoitteessa topromobility.com.

Tarkoitettu käyttö

TOPRO Troja 5G on tarkoitettu tueksi käyttäjille, joilla on heikentynyt tasapaino ja/tai alentunut kävelykyky. Rollaattori on suunniteltu työnnettäväksi, ei vedettäväksi. Integroitu istuin tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden levätä tarvittaessa. Tarkoitettu käyttäjä on aikuinen. Käyttöön liittyy pituus- ja painorajoituksia. *Vasta-aiheet: Tuote ei sovellu henkilöille, joilla on heikko käsivoima, erittäin huono tasapaino tai merkittäviä kognitiivisia haittoja. Tuote on suunniteltu ja hyväksytty sekä sisä- että ulkokäyttöön. Ulkona rollaattori on tarkoitettu avuksi kävelymään teillä ja poluilla. Se ei sovellu epätasaiselle ja/tai jyrkälle maastolle eikä portaiden käyttöön.*

Rollaattorin tuntemiseksi ja sen oikeanlaisen käytön oppimiseksi suositellaan koulutusta ammattilaisen ohjauksessa.

0 Tämän käyttöohjeen harmaat numeroidut ympyrät viittaavat numeroituun tietokuvaan ja kansin sisällä oleviin kuviin

1 TOPRO-tuotteeseen saaminen

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| A Kahva | I Korkeussäätövipu |
| B Jarruvipu | J Ostoskassi |
| C Soittokello | K Sivurunko |
| D Kahvaputki | L Reunasuojus |
| E Jarruvaijeri | M Jarrupala |
| F Istuinputket / kantokahva | N Kallistustoiminto |
| G Lukituskiinnike | O Irrotettavat pyörät |
| H Istuin hihnalla | P Tuotemerkintä |
| | taittomekanismia varten |

2 Turvallisuus

Ole varovainen rollaattoria kokoon taittaessa tai avatessasi ettet satuta sormiasi.

Varo laittamasta sormiasi avoimiin reikiin tai rollaattorin osien väliin.

Varmista, että kahvojen korkeuden säätövipu on tiukasti lukittu.

Varmista paikoillaan tai pysäköitynä ollessa, että molempien puolten seisontajarrut ovat lukitussa asennossa (A).

Älä käytä rollaattoria portaissa. Ole varovainen ylittäessäsi reunakiveyksiä jne.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa jarrut ja että rollaattori lukittuu avattuun asentoon.

Älä käytä rollaattoria raskaiden kuormien tai henkilöiden kuljettamiseen.

Huomaa, että jotkin rollaattorin osat voivat tuntua kuumilta tai kylmiltä, kun ne altistuvat äärimmäisille lämpötiloille.

Älä muuntele tuotetta, koska se voi vaarantaa turvallisuutesi ja takuu raukeaa.

Ennen kuin istut istuimella (C), varmista, että molempien puolten seisontajarrut ovat lukitussa asennossa (A).

Kaatumisvaaran välttämiseksi älä nojaa tai kurkota sivullepäin tai rollaattorin taakse istuma-asennossa. Älä kallista

rollaattoria liikaa sivuttain (D) kaatumisvaaran välttämiseksi. Samasta syystä laukkuja tms. ei tule koskaan ripustaa rollaattorin kahvoihin.

Oikean tuen ja turvallisuuden takaamiseksi kävele suoraan ja varmista, että rollaattori on mahdollisimman lähellä kehoasi (E). Kävele takapyörien välissä (F), ei niiden takana (G).

Huomaa, että alamäessä rollaattori voi liikkua nopeammin kuin sinä, mikä voi aiheuttaa kaatumisvaaran. Säädä nopeutta aktivoimalla ajotarrut (B).

Ole varovainen, kun käytät väliä hameita ja housuja, koska ne voivat tarttua pyöriin, mikä voi johtaa kaatumiseen. Käytä tukevia jalkineita vammojen välttämiseksi.

Turvallisuussyistä rollaattorilla istuminen julkisissa liikennevälineissä on kielletty. Säilytä rollaattori turvallisesti ja varmista, että molempien puolten seisontajarrut ovat aktivoituneet (A).

Älä käytä rollaattoria liukkaila tai jäisillä pinnoilla.

Pidä rollaattori etäällä tules- ta ja kuumista esineistä.

Älä kiipeä rollaattorin päälle.

3 Avaaminen / Kokoon taittaminen

Avaaminen: Vapauta istuintankoihin sijoitettu lukituspuristin (A). Paina istuintangot alas ja ulos. Sivurungot liukuvat erilleen. Paina istuintankoja alas (B). Kuulet naksahduksen. Rollaattori on nyt lukittu avoimeen asentoon.

Taitto: Vedä istuimen hihnaa (C) ja paina sivurunkoja yhteen. Lukitse puristin (D) istuintankojen päälle.

Rollaattorin kantaminen:

Rollaattoria ei saa kantaa istuin- hihnasta tai jarruvaijereista. Taita rollaattori kokoon kuvan (E) mukaisesti. Kanna rollaattoria istuintangoista (F), kun se on taitettuna.

4 Kahvat / Muisti-toiminto

Korkeuden säätö: Vedä vipua (A) ylöspäin ja säädä kahvapatki sopivalle korkeudelle (B). Vapauta vipu ja liikuta kahvapatkea hieman ylös ja alas, kunnes kuulet napsahduksen. Varmista, että vipu osoittaa alaspäin (C). Säädä molemmat kahvat samalle korkeudelle vertaamalla kummankin puolen asteikkoja. *Suosittelavaa on, että kahvat asetetaan samalle korkeudelle kuin ranteesi, kun käsivartesi roikkuvat vapaasti vartalon sivuilla.*

Muistitoiminto: Valitse haluttu kahvojen korkeus (katso numeroasteikko). Laske näkyvissä olevien reikien määrä kahvaputken takapuolella. Irrota ruuvi (D) kiinnitysosasta ylhäältä. Vedä vipua ylöspäin (A) ja vedä putki (E) ulos rungosta. Kiinnitysosaa (F) seuraa nyt kahvaputkea. Siirrä kiinnitysosaa (F) niin, että sen yläpuolella olevien reikien määrä vastaa aiemmin laskettua. Aseta punainen muistimerkki (G) kahvaputkeen ensimmäiseen vapaaseen reikään kiinnitysosaa (F) alapuolella. Vedä vipua ylöspäin (A) ja työnnä kahvaputki (E) ja kiinnitysosaa (F) alaspäin ja takaisin sivurunkoon (H). Kiinnitä ruuvi (D) takaisin kiinnitysosaa yläosaan. Vedä vipua ylöspäin (A), vedä kahva ylös, kunnes se pysähtyy, ja vapauta vipu. Tästä eteenpäin kahvojen ollessa alimmassa asennossa ne pysähtyvät ennalta asetettuun korkeuteen, kun ne vedetään ylös.

5 Jarrut

Varmista ennen jokaista käyttöä, että jarrut toimivat. Kukin jarruvipu (A) vaikuttaa omaan takapyöräänsä. *Älä työnnä tai vedä rollaattoria, kun seisontajarrut ovat päällä.*

Seisontajarrut: Paina molemmat jarruvivut (A) alaspäin, kunnes ne lukittuvat. Molemmat takapyörät ovat nyt lukittuina. Vapauta seisontajarrut puristamalla

molemmat jarruvivut ylöspäin.

Ajojarrut: Vedä molemmat jarruvivut (B) ylöspäin hidastaaksesi nopeutta. *Älä käytä jarruja jatkuvasti rollaattorin liikkeessa.*

Säätö / tarkistus: Löysää mutteri (C). Kiristä jarruvaijeri (D) säätöruuvilla (E). Säädä jarrupala (F) siten, että etäisyys sisäiseen rumpujarruun on noin 1,5 mm, ja kiristä sitten mutteri (C). Pyöritä pyörää ja varmista, ettei jarrupala kosketa pyörää.

Huolto: Puhdista jarrupala (F) ja jousi (G) säännöllisesti. Pyörät ja jarrut voidaan vaihtaa, jos ne ovat kuluneet tai vaurioituneet.

6 Irrotettavat pyörät

Irrottaminen: Vapauta jarruvipu. Paina navassa olevaa punaista painiketta (A) alas ja liu'uta pyörä pois akselilta (B) pitäen painike painettuna.

Kiinnittäminen: Vapauta jarruvipu. Liu'uta pyörä akselille (B). Paina pyörää mahdollisimman pitkälle sisään päin, jotta se napsahtaa kiinni akseliin. Kun pyörä lukittuu, kuuluu napsahdus. Pyörä on kunnolla kiinnitetty, kun akseli näkyy selkeästi navan keskellä (C). Vedä pyörä kevyesti ulospäin varmistaaksesi, että se on kunnolla kiinnittynyt akseliin. Kun uusi pyörä on asennettu rollaattoriin, tarkista, että jarrut toimivat oikein. Säädä tarvittaessa (katso kohta Jarrut). *Huom: Etu- ja takapyörät ovat erilaisia. Takapyörissä on sisä-jarrutusta varten rengas.*

7 Istuin

Rollaattorissa on turvallinen ja käytännöllinen verkkokankainen istuin, jonka läpi näkee maahan kävellessä. Istuimen voi helposti puhdistaa pyyhkimällä liinalla. Ennen istuimen käyttöä on seisontajarrut aktivoitava. Paina molemmat jarruvivut alas, kunnes ne lukittuvat (A). Molemmat takapyörät ovat nyt lukittuina. Istu selkä ostoskassia kohti (B).

8 Reunasuojus / Kallistustoiminto

Reunasuojus: Reunasuojukset (A), jotka sijaitsevat takapyöräiden edessä, estävät pyörä tартuttomasta kiinni kulmiin, ovenkarmeihin ym.

Kallistustoiminto: Käytä kallistus-toimintoa painamalla jalan etuosalla kallistuspoljinta (B), joka sijaitsee takapyörän vieressä. Tämä helpottaa rollaattorin kallistamista kynnyksien, reunojen ym. yli. *Huom: Ole varovainen ylittäessäsi reunakiviä ja vastaavia esteitä.*

9 Ostoskassi

Kassi kestää enintään 10 kilon painon ja sen voi pestä hellävaraisesti enintään 60 °C:ssa.

Asennus: Aseta seisontajarrut päälle (A). Aseta kassin kiinnikkeet (B) rollaattorin kantokahvoihin ja paina ne alas. Kun kassi on oikein paikoillaan, kuuluu napsahdus. Varmista, että jarruvaijeri kulkee edelleen vapaasti runkoa pitkin (C). **Irrotus:** Aseta seisontajarrut päälle (A). Aseta kädet kassin etuosaan, kummallekin puolelle. Nosta kassi ylöspäin puristamalla sitä kevyesti yhteen. Varo, ettet satuta sormiasi.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip tarjoaa ergonomiset ote- ja tukipinnat. Kahvojen yläetureuna tarjoaa tukevan otteen, kun nousestaan ylös tuolista tai sohvalta. Varmista aina, että seisontajarrut ovat päällä, kun nouset istuma-asennosta. ErgoGrip antaa lisätukea myös seistessä. Kävelyn aikana tulee aina käyttää perinteistä kahvaotetta, jotta ajojarruihin pääsee helposti käsiksi.

Kuljetus

Rollaattori tulee kuljettaa taitettuna ja lukittuna (katso kohta 3: Avaaminen / Taittaminen). Varmista, että lukituskiinnike on kunnolla kiinnitetty, jotta rollaattori ei pääse avautumaan tahattomasti. Ole varovainen rollaattoria ajoneuvoon lastatessa ja varmista, että se pysyy kunnolla paikoillaan. Rollaattorin voi asettaa makuuasentoon nostamalla sitä runkoputkesta.

Säilytys

Rollaattori tulee säilyttää pystyasennossa. Jos se säilytetään ulkona, sen on oltava suojan alla suojattuna sääolosuhteilta. Älä jätä rollaattoria vartioimatta. Älä aseta raskaita esineitä rollaattorin päälle säilytyksen aikana.

Puhdistus

Rollaattori voidaan puhdistaa kostealla liinalla. Jos siihen on kertynyt mutaa tai likaa, voidaan käyttää mietoa pesuaineliuosta ja sen jälkeen huuhtella haalealla vedellä. Vältä huuhtelua suoraan kuulalaakereihin (pyörissä ja etuhaarukoissa). Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai höyrypesua. Kuivaa rollaattori pehmeällä liinalla.

Desinfiointi

Desinfioinnin saa suorittaa vain valtuutettu henkilöstö. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai apuvä-

lineakeskukseen. Desinfiointin aikana on käytettävä riittäviä suojavarusteita ja noudatettava desinfiointiaineen valmistajan ohjeita. Rollaattorin pinnat tulee puhdistaa pehmeällä liinalla tai sienellä ja hyväksytyllä kemiallisella desinfiointiaineella, joka sisältää 70–80 % etanolia. Emme suosittele klooria tai fenolia sisältäviä desinfiointiaineita. *Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista tai loukkaantumisista, joita aiheutuu haitallisten desinfiointiaineiden tai -menetelmien käytöstä tai jos desinfiointi suoritetaan valtuuttamattoman henkilön toimesta.*

Tarkastus / Huolto / Uudelleenkäyttö

On suositeltavaa, että rollaattori tarkastetaan ja huolletaan säännöllisesti (huoltoväli määräytyy sen mukaan, kuinka usein ja millä tavoin rollaattoria käytetään). Tarkista seuraavat osat: runko, ruuvit, kahvat, kahvaputket, jarrut, jarruosat, pyörät, istuin ja lisävarusteet. Tämä koskee myös tilannetta, jossa rollaattori valmistellaan uudelleenkäyttöön. Tarkemmat ohjeet jarrujen huollosta sekä puhdistuksesta/desinfiointista löytyvät tästä käyttöohjeesta. Suositeltu huolto ei ole pakollista, eikä ennakoivaa huoltoa vaadita, mikäli rollaattoria käytetään tämän käyttöohjeen mukaisesti.

Materiaali / Kierrätys

Rollaattori on valmistettu muovipinnoitetuista alumiiniputkista, muovisista liitososista sekä muovi- ja polyesterimateriaaleista. Kaikissa pyörissä ja haarukoissa on kuulalaakerit. Suurin osa rollaattorin osista on kierrätettävissä. Hävitä rollaattori ja sen pakkausmateriaalit maasi voimassa olevien määräysten mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta viranomaisilta.

Takuu

TOPRO Troja 5G:lle myönnetään 7 vuoden takuu valmistus- ja materiaallivirheiden osalta. Väärästä käytöstä johtuvat vauriot tai osat, jotka altistuvat normaalille kulumiselle (esim. jarrupala, jarruvaijeri, pyörät, kassi, istuin ja kahvat), eivät kuulu 7 vuoden takuun piiriin. Takuuajan aikana tehtäviä korjauksia varten ota yhteyttä paikalliseen apuvälineliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Takuu raukeaa, jos tuotteessa on käytetty valtuuttamattomia varaosia tai lisävarusteita. Tuotteen arvioitu käyttöikä on 10 vuotta, jos sitä käytetään tämän käyttöohjeen sekä turvallisuus- ja huolto-ohjeiden mukaisesti.

10 Tuotemerkintä

- 1 - Valmistaja
- 2 - Tutustu käyttöohjeeseen (sininen kuvake)
- 3 - Mallin nimi
- 4 - Mallinumero
- 5 - Valmistuspäivämäärä
- 6 - Sarjanumero
- 7 - Kansainvälinen kauppatuotenumero (GTIN)
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Käyttäjän enimmäispaino
- 10 - Rollaattorin suurin pituus
- 11 - Rollaattorin suurin leveys / korkeus
- 12 - Tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön
- 13 - Lääkinnällinen laite
- 14 - CE-merkintä (Tämä tuote täyttää lääkitäviä laitteita koskevan EU-asetuksen (2017/745) vaatimukset)

Lisävarusteet

	TOPRO-tuotenumero
Pehmustettu selkänöja, 67 cm	815270
Pehmustettu selkänöja, 75 cm	815272
Tarjotin	814728
Liukuestematto tarjottimelle	814059
Kainalosauvateline, musta	814040
Pulloteline, musta	814043
LED-lamppu, klipsikiinnitys ja USB-liitin	815260
Sateenvarjo kiinnikkeellä, musta	814068
Yhden käden jarru	814026
Opaskahva näkövammaiselle	814014
Takalaukku vetoketjulla	814046
Nimilappu	814024
Vierintävastusjärjestelmä, pari	814038
Kuljetuslaukku	814042
Happipullokori (vain paineistetuille, ei nestemäisille pulloille)	814009
Maastopyörät, sarja neljä kappaletta	815302
Nastarenkaat, 2 takapyörää	815331

Rollaattoriin kiinnitetyt lisävarusteet voivat vaikuttaa sen vakauteen, joten suosittelemme käyttämään niitä harkiten. Lisävarusteita voi tilata erikseen, jolloin TOPRO Troja 5G voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin. Ota yhteyttä apuvälineliikkeeseen, jälleenmyyjään tai TOPROon saadaksesi ajantasaisen yhteenvedon saatavilla olevista lisävarusteista tai vieraile verkkosivuillamme: topromobility.com.

Til hamingju með valið á nýrri TOPRO göngugrind

Hver og ein TOPRO-göngugrind er þróuð, hönnuð og framleidd í Noregi. Yfirlýst er að varan sé í samræmi við reglugerð (EBE) 2017/745 um lækningatæki. Hún er prófuð og viðurkennd í samræmi við EN ISO 11199-2:2021. Vinsamlegast athugaðu vöruna við viðtöku hennar. Vinsamlegast hafðu samband við hjálpartækjaverslun eða söluaðila ef þú hefur einhverjar fyrirspurnir. Ef þú ert í vandræðum með að lesa þessa notendahandbók er rafræn útgáfa tiltæk á topromobility.com.

Intended use

TOPRO Troja 5G er hönnuð til að styðja notendur með skerta jafnvægisgetu og/eða skerta gönguhæfni. Hún er ætluð til að vera ýtt, ekki dregin. Innbyggður sæti gerir notanda kleift að hvíla sig ef þörf er á. Hjálpartækið er ætlað fyrir fullorðna. Takmarkanir varðandi hæð og þyngd gilda. *Frábendingar: Vöran hentar ekki einstaklingum með litla armstyrk, mjög slakt jafnvægi eða verulegar vitrænskærðingar. Varan er hönnuð og samþykkt til notkunar bæði innanhúss og utanhúss. Utandyra er rollatorinn ætlaður sem hjálpartæki til göngu á vegum og göngustígum. Hann er ekki hentugur á ójöfnu eða bröttu undirlagi, né heldur á tröppum.*

Til að kynnast rollatornum og læra á hann á réttan hátt er mælt með þjálfun hjá fagaðila.

0 Gráu númeruðu hringirnir í þessari notendahandbók vísa til númeraðra myndrænna upplýsinga og skýringarmynda á innri hlið kápu.

1 Kynntust TORPO-vörunni þinni

A	Handfang	I	Spakinn til hæðarstillingar
B	Bremsuhandfang	J	Innkaupataška
C	Bjalla	K	Hliðargrind
D	Handfangsrör	L	Brúnvörn
E	Bremsukapall	M	Bremsuklossi
F	Sætisstangir / Burðarhandfang	N	Hallafallsaðstoð
G	Læsingarklemma	O	Afhenganleg hjól
H	Sæti með ól fyrir samanbrot	P	Vöruimerking / Vörulýsingarmerki

2 Öryggi

Vertu varkár þegar rollatorinn er lagður saman eða brettur út, svo þú klemmdir ekki fingurna.

Forðastu að setja finger í op eða milli fastra hluta.

Gakktu úr skugga um að hæðarstillingarstöng handfangsins sé vel læst.

Þegar rollatorinn er kyrrstæður eða lagður frá, vertu viss um að stöðubremsurnar á báðum hliðum séu virkjaðar (A).

Ekki nota rollatorinn á tröppum. Vertu sérstaklega varkár við gangstéttarbrúnir o.þ.h.

Athugaðu bremsurnar fyrir hverja notkun og að rollatorinn læsist í opinni stöðu.

Ekki nota rollatorinn til að flytja þunga byrðar eða fólk.

Athugaðu að sumir hlutar rollatorsins geta orðið heitir eða kaldir í öfgafullum hita eða kulda.

Ekki breyta vöruinni, þar sem það getur stefnt öryggi í hættu og ógilt ábyrgðina.

Áður en sest er á sætið (C), vertu viss um að stöðubremsurnar á báðum hliðum séu virkjaðar (A).

Til að draga úr fallhættu, ekki halla þér til hliðar né aftur fyrir rollatorinn þegar þú situr (D). Ekki halla rollatornum of mikið til hliðar. Af sömu ástæðu mega töskur o.þ.h. ekki hanga á handföngunum.

Til að fá réttan stuðning og öryggi, gakktu upprétt(ur) og hafðu rollatorinn eins nálægt líkamanum og mögulegt er (E). Gakktu milli afturhjóla (F), ekki fyrir aftan þau (G).

Vertu meðvituð/aður um að rollatorinn getur rúllað hraðar en þú þegar þú gengur niður brekku, sem getur valdið fallhættu. Virkjaðu akstursbremsurnar til að stýra hraðanum (B).

Vertu varkár í flegnum pilsum eða buxum þar sem þau geta flækst í hjólnum og valdið slysi. Notaðu stöðugan skófmatnað til að forðast meiðsli.

Af öryggisástæðum er bannað að sitja á rollatornum í almenningssamgöngum. Geymdu rollatorinn á öruggan hátt og virkjaðu stöðubremsur á báðum hliðum (A).

Ekki nota rollatorinn á hálum eða íslögðum yfirborðum.

Haltu rollatornum fjarri eldi og heitum hlutum.

Ekki klifra á rollatorinn.

3 Afbrotning / Samfelling

Afbrotning: Losaðu læsingarklemmuna sem er staðsett við sætisstangirnar (A). Ýttu sætisstöngunum niður og út á við. Hliðarrammarnir gliðna í sundur. Ýttu sætisstöngunum niður (B). Þú munt heyra smell. Rollatorinn er nú læstur í opna stöðu.

Samfelling: Dragðu í ólina á sæti (C) og þrýstu hliðarrömmunum saman. Læstu klemmuna (D) yfir sætisstangirnar.

Flutningur rollatorsins: Ekki bera rollatorinn með því að lyfta í sætisólina eða bremsukaplana. Felldu saman rollatorinn samkvæmt mynd (E). Þegar hann er samanbrottinn, berðu hann með því að halda í sætisstangirnar (F).

4 Handföng / Minnisaðgerð

Hæðarstilling: Dragðu í stillivipuna (A) upp á við og stilltu handfangsrörið á viðeigandi hæð (B). Slepptu vippunni og hreyfðu handfangsrörið örlítið upp og niður þar til þú heyrir smell. Gakktu úr skugga um að vipan snúi niður (C). Stilltu bæði handföngin í sömu hæð með því að bera saman talnastikurnar á hvorri hlið. *Mælt er með því að handföngin séu í sömu hæð og úlnliðirnir þegar handleggirnir hanga beint niður með líkamanum.*

Minnisaðgerð: Ákveddu æskilega hæð handfanganna (sjá talnastiku). Teldu sýnilegu götin aftan á handfangsrörum. Losaðu skrúfuna (D) efst á festihlutanum. Dragðu vippuna upp (A) og dragðu rörið (E) út úr rammanum. Festihlutinn (F) fylgir nú með rörinu. Færðu festihlutann (F) þannig að fjöldi gata fyrir ofan hann samsvari áður töldum götum. Settu rauða minniskubbin (G) í fyrsta lausa gatið fyrir neðan festihlutann (F) á handfangsrörinu. Dragðu vippuna upp (A) og ýttu handfangsrörinu (E) og festihlutanum (F) niður í hliðargrindina (H). Skrúfaðu skrúfuna (D) aftur efst á festihlutann. Dragðu vippuna upp (A), dragðu handfangið upp þar til það stoppar og slepptu síðan vippunni. Héðan í frá munu handföngin, þegar þau eru í lægsta stöðu, stoppa í fyrirfram stilltri hæð þegar þau eru dregin upp.

5 Bremsur

Vertu viss um að bremsurnar virki áður en lagt er af stað í hverri ferð. Hver bremsuhandfang (A) stjórnar einni af afturhjólnum. *Ekki keyra eða ýta rollatornum þegar stöðubremsur eru virkjaðar.*

Stöðubremsur: Ýttu báðum bremsuhandföngum (A) niður þar til

þau læsast. Báðar afturhjólin eru nú læst. Til að losa stöðubremsurnar, kreistu báðar bremsuhandfangar upp á við.

Akstursbremsur: Dragðu báðar bremsuhandfangar (B) upp á við til að draga úr hraða. *Ekki nota þær stöðugt meðan á hreyfingu stendur.*

Stillt / Athugað: Losaðu um rærna (C). Þrýstu bremsukaplinum (D) með stilliskrúfunni (E). Stilltu bremsuklossann (F) þannig að bilið við innra tromlubremsuna sé u.þ.b. 1,5 mm og herðu svo rærna (C) aftur. Snúðu hjólinu til að ganga úr skugga um að bremsuklossinn snerti ekki hjólið.

Viðhald: Hreinsaðu reglulega bremsuklossann (F) og bremsufjaðrina (G). Hægt er að skipta um hjól og bremsur ef þau eru orðin slitinn eða skemmd.

6 Lausanleg hjól

Fjarlægning: Losaðu bremsuhandfangið.

Ýttu á rauða hnappinn á hjólmölinni (A) og renndu hjólinu af öxlinum (B) á meðan hnappurinn er enn þrýstur niður.

Uppsetning: Losaðu bremsuhandfangið. Renndu hjólinu inn á öxlina (B). Ýttu hjólinu eins langt inn á öxlina og mögulegt er þar til það smellur á sinn stað. Þú munt heyra smell þegar hjólið læsist í rétta stöðu. Hjólið er örugglega fest þegar öxullinn sést greinilega í miðju mölinnar (C). Dragðu varlega í hjólið til að athuga að það sé rétt fest á öxulinn. Eftir að nýtt hjól hefur verið sett á rollatorinn, vertu viss um að bremsurnar virki rétt. Stilltu þær aftur ef þörf krefur (*sjá kafla Bremsur*). *Athugið: Fram- og afturhjólin hafa mismunandi. Afturhjólin hafa hring fyrir innri bremsur.*

7 Sæti

Rollatorinn er búinn öruggu og þægilegu sæti úr netefni, sem gerir kleift að sjá til jarðar meðan gengið er. Sætið er auðvelt að þrifa með rökum klút ef þörf krefur. Stöðubremsurnar verða að vera virkjaðar áður en sest er á sætið. Ýttu báðum bremsuhandföngum niður þar til þær læsast (A). Báðar afturhjólin eru þá læst. Settu þig niður með bakið að töskunni (B).

8 Brúnvörn / Hallaðstoð

Brúnvörn: Brúnvörnurnar (A), sem eru staðsettar fyrir framan afturhjólin rollatorsins, koma í veg fyrir að hjólin festist við horn, hurðakarma o.þ.h.

Hallaðstoð: Til að nota hallaðstöðina, notaðu fremri hluta fótans og ýttu á hallapressufótstigið (B), sem er við hlið afturhjólsins. Þetta hjálpar til við að halla

rollatornum yfir þröskulda, brúnir o.fl. *Athugið: Vertu varkár þegar farið er yfir gangstéttarbrúnir og sambærileg hindrun.*

9 Innkaupataška

Taskan rúmar allt að 10 kíló og má þvo varlega við allt að 60 °C.

Uppsetning: Settu stöðubremsurnar á (A). Settu festingarnar á töskunni (B) yfir burðarhandföng rollatorsins og ýttu þeim niður. Þegar taskan er rétt fest, heyrir smellur. Gakktu úr skugga um að bremsukapallinn liggi áfram frjálst meðfram rammanum (C).

Fjarlægning: Settu stöðubremsurnar á (A). Settu hendurnar að framanverðri töskunni, sitt hvoru megin. Lyftu töskunni upp á meðan þú þrýstir henni varlega saman. Varastu að meiða fingurna.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip býður upp á þægilegt og öruggt grip með góðum stuðningsflötum. Fremri efri hluti handfanganna veitir stöðugt grip þegar staðið er upp úr stól eða sófa. Gakktu alltaf úr skugga um að stöðubremsurnar séu virkjaðar þegar þú stendur upp. ErgoGrip veitir einnig aukinn stuðning þegar staðið er kyrr. Notaðu alltaf hefðbundna gripstöðu meðan á göngu stendur, til að tryggja auðveldan aðgang að akstursbremsunum.

Flutningur

Rollatorinn skal flytja samanbrottinn og læstur (sjá kafla 3: Afbrotning / Samfelling). Tryggðu að læsingarklemmann sé rétt festur, svo rollatorinn opnast ekki óvart. Vertu varkár þegar rollatorinn er settur í ökutæki og gakktu úr skugga um að hann sé tryggilega festur. Hægt er að leggja rollatorinn niður með því að lyfta honum upp með rammapippunni.

Geymsla

Rollatorinn skal geyma í uppréttri stöðu. Ef hann er geymdur utandyra, verður að vera yfir honum hlíf til verndar. Ekki skilja rollatorinn eftir án eftirlits. Ekki setja þunga hluti ofan á rollatorinn meðan á geymslu stendur.

Þrif

Hægt er að þrifa rollatorinn með rökum klúti. Ef hann er skítugur af leðu eða óhreininum má nota klút með mildu hreinsiefni og skola síðan með volgum vatni. Forðastu að sprauta beint á kúlu legur (í hjólum og framgaffli). Ekki nota slípefni eða gufuþvott. Þurrkaðu rollatorinn með mjúkum klúti.

Sóttþreinsun

Sóttþreinsun má eingöngu framkvæma af viðurkenndu starfsfólki. Hafðu samband við staðbundinn söluaðila eða hjálpartækjamiðstöð. Við sóttþreinsun skal nota viðeigandi hlífðarbúnað og fylgja leiðbeiningum framleiðanda sóttþreinsiefnisins. Yfirborð rollatorsins skal hreinsa með mjúkum klúti eða svampi og viðurkenndu efnafræðilegu sóttþreinsiefni sem inniheldur 70–80 % etanól. Við ráðleggjum gegn notkun sóttþreinsiefna sem innihalda klór eða fenól. *Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum eða slysum sem kunna að eiga sér stað vegna skaðlegra sóttþreinsiaðferða eða ef sóttþreinsun er framkvæmd af óviðkomandi aðilum.*

Skoðun / Viðhald / Endurnotkun

Mælt er með reglulegri skoðun og viðhaldi (tíðni fer eftir því hvernig og hversu oft rollatorinn er notaður). Athugaðu eftirfarandi hluti: ramma, skrúfur, handföng, handfangsrör, bremsur, bremsuhluti, hjól, sæti og aukahluti. Þetta á einnig við þegar rollatorinn á að undirbúa fyrir endurnotkun. Sjáðu nánari leiðbeiningar í þessari notendahandbók varðandi viðhald bremsa og þríf/ sóttþreinsun. Viðhald sem mælt er með er ekki skylda, og forvarnarviðhald er ekki nauðsynlegt að því gefnu að rollatorinn sé notaður samkvæmt leiðbeiningum þessarar handbókar.

Efni / Endurvinnsla

Rollatorinn er úr plast-húðuðum álrörum, plastsamskeytum og efni úr plasti og pólýester. Kúlulegur eru í öllum hjólum og gafflum. Flestir hlutar rollatorsins eru endurvinnanlegir. Fargaðu rollatornum og umbúðum hans samkvæmt gildandi reglum í þínu landi. Fyrir frekari upplýsingar skaltu hafa samband við opinbera yfirvöld á þínu svæði.

Ábyrgð

TOPRO Troja 5G er með 7 ára ábyrgð gegn göllum og bilunum. Skaði sem stafar af rangri notkun eða slithlutum (t.d. bremsuklossum, bremsuvírum, hjólum, tösku, sæti og handföngum) fellur ekki undir 7 ára ábyrgðina. Fyrir viðgerðir á ábyrgðartíma skal hafa samband við staðbundna hjálpartækjaverslun eða söluaðila. Ábyrgðin fellur úr gildi ef óviðurkenndir varahlutir eða aukahlutir hafa verið eða eru notaðir með vörninni. Áætlaður endingartími vöru er 10 ár, ef hún er notuð á réttan hátt samkvæmt þessari notendahandbók og öryggis- og viðhaldsleiðbeiningum hennar.

10 Vörumerkingar

- 1 - Framleiðandi
- 2 - Sjá notkunarleiðbeiningar (blátt tákn)
- 3 - Heiti líkan
- 4 - Númer líkan
- 5 - Framleiðsludagsetning
- 6 - Raðnúmer
- 7 - Alþjóðlegt vöruauðkennisnúmer (GTIN)
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Hámarksþyngd notanda
- 10 - Hámarkslengd rollators
- 11 - Hámarksbreidd / hæð rollators
- 12 - Ætlað til notkunar inni og úti
- 13 - Lækningatæki
- 14 - CE-merki (Þessi vara uppfyllir reglugerð ESB um lækningatæki (2017/745))

Aukabúnaður

	TOPRO vörunúmer
Bakstoð með bólstrun, 67 cm	815270
Bakstoð með bólstrun, 75 cm	815272
Bakka	814728
Rennihindrunarmotta fyrir bakka	814059
Hekkuhaldari, svartur	814040
Flöskuhaldari, svartur	814043
LED-lampi með klemmu og USB-tengi	815260
Regnhlíf með festingu, svört	814068
Bremsa fyrir eina hönd	814026
Leiðarhandfang fyrir sjónskerta	814014
Bakpoki með rennilás	814046
Nafnspjald	814024
Mótstöðuhemlar, par	814038
Flutningspoki	814042
Karfa fyrir súrefniskúta (aðeins þrýstiloft, ekki vökvaform)	814009
Torfæruhjul, fjögurra hjóla sett	815302
Negld dekk, 2 afturhjul	815331

Aukahlutir sem festir eru á rollator geta haft áhrif á stöðugleika hans, því ráðleggjum við að nota þá með varúð. Aukahluti er hægt að panta sérstaklega til að sérsníða TOPRO Troja 5G að einstaklingsbundnum þörfum. Hafðu samband við hjálpartækjaverslun, söluaðila eða TOPRO til að fá uppfærða yfirlit yfir fáanlega aukahluti, eða heimsóttu heimasíðuna okkar: topromobility.com.

Félicitations pour votre choix d'un nouveau déambulateur TOPRO

Chaque déambulateur TOPRO est développé, conçu et fabriqué en Norvège. Le produit est déclaré conforme au règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux. Il est testé et approuvé selon la norme EN ISO 11199-2 : 2021. À la réception de la marchandise, veuillez vérifier votre produit. Si vous avez des questions, veuillez contacter immédiatement votre magasin de mobilité ou votre revendeur. Si vous rencontrez des difficultés pour lire ce manuel d'utilisation, une version électronique est disponible sur topromobility.com.

Utilisation prévue

Le TOPRO Troja 5G doit apporter un soutien aux utilisateurs ayant un équilibre réduit et / ou une capacité de marche réduite. Il est conçu pour être poussé, pas tiré. Le siège intégré offre à l'utilisateur la possibilité de se reposer si nécessaire. L'utilisateur visé est un adulte. Des restrictions de taille et de poids s'appliquent. *Contre-indications : Le produit ne convient pas aux personnes ayant une faible force dans les bras, avec un très mauvais équilibre, ou avec des handicaps cognitifs considérables. Le produit est conçu et approuvé pour une utilisation à l'intérieur et en extérieur. À l'extérieur, le déambulateur est destiné à être une aide pour marcher sur les routes et les sentiers. Il ne convient pas aux terrains accidentés et / ou escarpés, ni aux escaliers.*

Pour apprendre à connaître le déambulateur et apprendre à l'utiliser correctement, une formation par un professionnel est recommandée.

0 Les cercles numérotés gris de ce manuel d'utilisation font référence au graphique d'information numéroté et aux illustrations à l'intérieur de la couverture

1 Apprenez à connaître votre produit TOPRO

A Poignée	I Levier de réglage de la hauteur
B Levier de frein	J Sac à provisions
C Sonnette	K Cadre latéral
D Tube de poignée	L Protecteur de bords
E Câble de frein	M Bloc de frein
F Barres de siège / Poignée de transport	N Aide au basculement
G Bride de sécurité	O Roues interchangeables
H Siège avec ruban pour mécanisme de pliage	P Étiquette du produit

2 Sécurité ⚠

Lors du pliage ou dépliage prenez garde à vos doigts.

Attention à ne pas mettre vos doigts dans des trous ouverts ou entre des pièces fixes.

Assurez-vous que le levier de verrouillage pour le réglage en hauteur des poignées est bien verrouillée.

À l'arrêt ou en stationnement, assurez-vous que les freins de stationnement des deux côtés sont en position verrouillée (A).

N'utilisez pas le déambulateur dans les escaliers. Soyez prudent lorsque vous passez des trottoirs etc.

Vérifiez les freins avant chaque utilisation, et que le déambulateur se verrouille bien en position dépliée.

N'utilisez pas le déambulateur pour transporter des charges lourdes ou des personnes.

Sachez que certaines parties du déambulateur peuvent être chaudes ou froides lorsqu'elles sont exposées à des températures extrêmes.

Ne modifiez pas le produit car cela pourrait mettre votre sécurité en danger et la garantie sera annulée.

Avant de vous asseoir sur le siège (C), assurez-vous que les freins de stationnement des deux côtés sont en position verrouillée (A).

Pour éviter le risque de chute, ne vous penchez pas latéralement ou vers

l'arrière du déambulateur en position assise (D). N'inclinez pas trop le déambulateur latéralement, pour éviter le risque de chute. Pour la même raison, les sacs et autres objets ne doivent jamais être accrochés aux poignées.

Pour apporter un bon soutien en toute sécurité, marchez droit et assurez-vous que le déambulateur est maintenu aussi près de votre corps que possible (E). Marchez entre les roues arrière (F), pas derrière elles (G).

Sachez que le déambulateur peut rouler plus vite que vous ne marchez en descente, ce qui peut vous exposer à un risque de chute. Activez les freins de marche pour régler la vitesse (B).

Soyez prudent lorsque vous portez des jupes ou des pantalons larges, car ils pourraient se prendre dans les roues, ce qui pourrait entraîner une chute. Portez des chaussures robustes pour éviter les blessures.

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de s'asseoir sur le déambulateur dans les transports en commun. Rangez votre déambulateur en toute sécurité et assurez-vous que les freins de stationnement des deux côtés sont activés (A).

N'utilisez pas le déambulateur sur des surfaces glissantes ou glacées.

Gardez le déambulateur à l'écart du feu et des objets chauds.

Ne montez pas sur le déambulateur.

3 Dépliage / Pliage

Dépliage : Ouvrez la bride de sécurité positionnée au niveau des barres de siège (A). Appuyez sur les barres de siège vers le bas et vers l'extérieur. Les cadres latéraux glisseront séparément. Appuyez sur les barres de siège (B). Vous entendrez un click. Le déambulateur est maintenant verrouillé dans sa position ouverte.

Pliage : Tirez le ruban sur le siège (C) et appuyez sur les cadres latéraux. Verrouillez la bride (D) sur les barres de siège.

Transport du déambulateur : Le déambulateur ne doit pas être transporté par le ruban du siège ou par les câbles de frein. Pliez le déambulateur comme indiqué sur l'illustration (E). Portez le déambulateur par les barres de siège (F) lorsqu'il est plié.

4 Poignées / Fonction mémoire

Réglage de la hauteur : Tirez le levier (A) vers le haut et ajustez le tube de poignée (B) à la hauteur souhaitée. Relâchez le levier et bougez légèrement le tube de poignée de haut en bas jusqu'à entendre un clic. Assurez-vous que le levier est dirigé vers le bas (C). Réglez les deux poignées à la même hauteur en comparant les échelles de chaque côté. *Il est recommandé que les poignées soient réglées à la même hauteur que vos poignets lorsque vos bras sont suspendus à côté de votre corps.*

Fonction mémoire : Déterminez la hauteur souhaitée des poignées (voir l'échelle graduée). Comptez les trous visibles à l'arrière des tubes de poignée. Dévissez la vis (D) sur le dessus de la pièce de fixation. Tirez le levier (A) vers le haut et retirez le tube (E) du cadre. La pièce de fixation (F) suit alors le tube de poignée. Déplacez la pièce de fixation (F) de manière à ce que le nombre de trous au-dessus corresponde à celui que vous avez compté. Insérez le clip mémoire rouge (G) dans le premier trou disponible sous la pièce de fixation (F). Tirez le levier (A) vers le haut et poussez le tube de poignée (E) et la pièce de fixation (F) vers le bas, dans le cadre latéral (H). Revissez la vis (D) sur le dessus de la pièce de fixation. Tirez à nouveau le levier (A) vers le haut, tirez la poignée vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'arrête, puis relâchez le levier. Désormais, lorsque les poignées sont en position basse, elles s'arrêteront à la hauteur prédéfinie lorsqu'on les tire vers le haut.

5 Freins

Assurez-vous que les freins fonctionnent avant chaque utilisation. Chaque levier de frein (A) actionne la roue arrière du même côté. *Ne conduisez pas et ne poussez pas le déambulateur pendant que les freins de stationnement sont activés !*

Freins de stationnement : Poussez les deux leviers de frein (A) vers le bas jusqu'à ce qu'elles se verrouillent. Les deux roues arrière sont maintenant bloquées. Tirez les deux leviers de frein vers le haut pour desserrer les freins de stationnement.

Freins de marche : Tirez les deux leviers de frein (B) vers le haut pour réduire la vitesse. *Ne pas utiliser en continu pendant que le déambulateur est en mouvement.*

Réglage / vérification : Desserrer l'écrou (C). Serrez le câble de frein (D) avec la vis de réglage (E). Réglez le bloc de frein (F) de sorte que la distance par rapport au frein à tambour intérieur soit d'environ 1,5 mm, puis serrez l'écrou (C). Tournez la roue pour vérifier que le bloc de frein ne touche pas la roue.

Entretien : Nettoyez fréquemment le bloc de frein (F) et le ressort de frein (G). Les roues et les freins peuvent être remplacés s'ils sont usés ou endommagés.

6 Roues interchangeables

Dépose : Desserrez le levier de frein. Appuyez sur le bouton rouge du moyeu (A) et faites glisser la roue de l'essieu (B) tout en appuyant sur le bouton vers le bas. **Fixation :** Desserrez le levier de frein. Faites glisser la roue sur l'essieu (B) tout en maintenant le bouton rouge (A) enfoncé. Poussez la roue aussi loin que possible vers l'intérieur de l'essieu pour que la roue s'enclenche sur l'essieu. Vous entendrez un « clic » lorsque la roue est en place. La roue est solidement fixée lorsque l'essieu est complètement visible au milieu du moyeu (C). Tirez doucement sur la roue pour vérifier qu'elle est solidement fixée à l'essieu. Une fois la nouvelle roue appliquée au déambulateur, assurez-vous que les freins fonctionnent correctement. Réajustez-les si nécessaire (voir la section Freins). *Veuillez noter que les roues avant et arrière sont différentes. Les roues arrière sont équipées d'un tambour pour le freinage interne.*

7 Siège

Le déambulateur dispose d'un siège en filet sûr et pratique, à travers lequel vous avez une vue sur le sol tout en marchant. Il peut facilement être essuyé avec un chiffon si nécessaire. Les freins de stationnement doivent être verrouillés avant d'utiliser le siège. Poussez les deux poignées de frein vers le bas jusqu'à ce qu'elles se verrouillent (A). Les deux roues arrière sont maintenant bloquées. Asseyez-vous le dos vers le sac à provisions (B).

8 Protecteur de bord / Aide au basculement

Protecteur de bord : Les protecteurs de bord (A), qui sont à l'avant des roues arrière empêchent les roues arrière de s'accrocher dans les coins, les cadres de porte, etc.

Aide au basculement : Pour utiliser la fonction d'aide au basculement, utilisez l'avant du pied et appuyez sur la pédale (B), qui se trouve à côté de la roue arrière. Cela permet d'incliner le déambulateur pour franchir les seuils, les bords, etc. Remarque : soyez prudent lorsque vous passez des trottoirs etc.

9 Sac à provisions

Le sac peut contenir jusqu'à 10 kilos et peut être lavé délicatement jusqu'à 60 °C.

Montage : Activez les freins de stationnement (A). Placez les supports du sac (B) sur les poignées de transport du déambulateur et poussez-les vers le bas. Lorsque le sac est positionné correctement, vous entendrez un click de chaque côté. Assurez-vous que le câble de frein fonctionne toujours sans retenue le long du cadre (C).

Retrait : Activez les freins de stationnement (A). Placez vos mains vers l'avant du sac, des deux côtés. Soulevez le sac tout en le pressant légèrement ensemble. Soyez conscient afin de ne pas vous blesser aux doigts.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip offre une prise en main ergonomique et des surfaces de soutien. L'avant supérieur des poignées offre une position de préhension stable lorsque vous vous levez d'une chaise ou d'un canapé. Assurez-vous toujours que les freins de stationnement sont activés lorsque vous vous levez de la position assise. L'ErgoGrip offre également un soutien supplémentaire en position debout. Utilisez toujours la position de préhension traditionnelle pour un accès facile aux freins de conduite pendant la marche.

Transport

Le déambulateur doit être transporté en position pliée et verrouillée (voir paragraphe 3 *Dépliage / Pliage*). Assurez-vous que la bride de sécurité est fermée afin que le déambulateur ne puisse pas se déplier involontairement. Soyez prudent lorsque vous chargez le déambulateur dans un véhicule, en faisant attention à le fixer. Le déambulateur peut être couché sur le flanc en le tenant par le cadre.

Stockage

Le déambulateur doit être rangé en position verticale. S'il est stocké à l'extérieur, il doit être mis sous une protection. Ne laissez pas votre déambulateur sans surveillance. Ne mettez pas d'objets lourds sur le déambulateur pendant le stockage.

Nettoyage

Le déambulateur peut être nettoyé à l'aide d'un chiffon humide. En cas d'accumulation de boue et de crasse, un chiffon avec un détergent de lavage doux peut être utilisé suivi d'un rinçage à l'eau tiède. Évitez de rincer directement contre les roulements à billes (dans les roues et les fourches avant). N'utilisez pas d'abrasifs ou de lavage à la vapeur. Séchez le déambulateur à l'aide d'un chiffon doux.

Désinfection

La désinfection ne doit être effectuée que par du personnel autorisé. Veuillez communiquer avec votre magasin de mobilité ou votre revendeur. Pendant la désinfection, un équipement de protection suffisant doit être porté et les instructions du fabricant du désinfectant doivent être suivies. La surface du déambulateur doit être nettoyée à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge et d'un désinfectant chimique approuvé contenant de l'éthanol à 70 à 80 %. Nous déconseillons les désinfectants contenant du chlore ou du phénol. *Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages ou blessures survenus à l'aide d'un désinfectant/mesures nocif ou d'une désinfection effectuée par du personnel non autorisé.*

Inspection / Entretien / Réutilisation

Il est recommandé d'effectuer régulièrement l'inspection et l'entretien (la fréquence est déterminée par la façon dont le déambulateur est utilisé et à quelle fréquence). Vérifiez les éléments suivants : cadre, vis, poignées, tubes de poignée, freins, pièces de frein, roues, siège et accessoires. Cela s'applique également lorsque le déambulateur doit être préparé pour être réutilisé. Veuillez consulter les instructions détaillées dans ce manuel d'utilisation sur l'entretien des freins et le nettoyage/désinfection. L'entretien recommandé n'est pas une exigence et aucun entretien préventif n'est requis à condition que le déambulateur soit utilisé conformément au présent manuel d'utilisation.

Matériaux / Recyclage

Le déambulateur est composé de tubes en aluminium revêtus de plastique, de raccords en plastique et de matériaux en plastique et en polyester. Des roulements à billes sont présents dans toutes les roues et fourches. La plupart des pièces de déambulateur peuvent être recyclées. Jetez le déambulateur et son emballage conformément à la réglementation applicable dans votre pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter vos autorités publiques.

Garantie

TOPRO Troja 5G est garanti exempt de défauts et de casse pendant 7 ans. Les dommages causés par une mauvaise utilisation ou des pièces exposées à l'usure naturelle (par exemple, bloc de frein, câble de frein, roue, sac à provisions, siège et poignée) sont exemptés de la garantie de 7 ans. Pour les réparations pendant la période de garantie, veuillez contacter votre magasin de mobilité local ou votre revendeur. La garantie est nulle si des pièces de rechange ou des accessoires non autorisés ont été ou sont utilisés sur le produit. La durée de vie prévue du produit est estimée à 10 ans s'il est utilisé correctement conformément à ce manuel d'utilisation et à ses instructions de sécurité et d'entretien.

10 Étiquette du produit

- 1 - Fabricant
- 2 - Consultez le manuel d'utilisation (symbole bleu)
- 3 - Nom du modèle
- 4 - Numéro de modèle
- 5 - Date de fabrication
- 6 - Numéro de série
- 7 - Numéro d'article du commerce international
- 8 - Code GS1
- 9 - Poids maximal de l'utilisateur
- 10 - Longueur maximale du déambulateur
- 11 - Largeur maximale / hauteur du déambulateur
- 12 - Destiné à une utilisation à l'intérieur et en extérieur
- 13 - Dispositif médical
- 14 - Marquage CE (Ce produit est conforme au règlement (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux)

Accessoires

	TOPRO Numéro d'article
Ceinture dorsale avec rembourrage, 67 cm	815270
Ceinture dorsale avec rembourrage, 75 cm	815272
Tablette coulissante	814728
Tapis antidérapant pour tablette	814059
Porte-canne, noir	814040
Porte-boisson, noir	814043
Lampe LED avec clip et prise USB	815260
Parapluie avec fixation, noir	814068
Frein simultané à une main	814026
Poignée pour accompagnateur	814014
Sacoche supplémentaire	814046
Plaque d'identification	814024
Système de résistance au roulement, paire	814038
Sac de transport	814042
Panier pour bouteille d'oxygène (unique-ment comprimé, pas liquide)	814009
Roues Offroad, jeu de 4 roues	815302
Roues Offroad avec picots, paire de roues arrière	815331

Les accessoires montés sur le déambulateur peuvent influencer la stabilité, nous vous conseillons donc de les utiliser avec précaution. Les accessoires peuvent être commandés séparément pour permettre au TOPRO Troja 5G d'être personnalisé en fonction des besoins individuels. Contactez votre revendeur spécialisé / votre magasin de fournitures médicales ou TOPRO pour un aperçu actualisé des accessoires disponibles, ou visitez notre page d'accueil **topromobility.com**.

Congratulazioni per aver acquistato un nuovo deambulatore TOPRO

Ogni deambulatore TOPRO è sviluppato, progettato e realizzato in Norvegia. Il prodotto è dichiarato conforme al Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745. È testato e approvato secondo la norma ISO 11199-2:2021. Al ricevimento della merce, si prega di controllare il prodotto. In caso di domande, contattare immediatamente l'ortopedia, il negozio o il rivenditore di questo ausilio. In caso di problemi nella lettura di questo manuale utente, è disponibile una versione digitale su topromobility.com.

Destinazione d'uso

TOPRO Troja 5G fornisce supporto agli utenti con equilibrio ridotto e/o ridotta capacità di deambulazione. È progettato per essere spinto, non tirato. Il sedile integrato offre all'utente l'opportunità di riposare, se necessario. Il suo utilizzatore è un adulto. Ci sono indicazioni e restrizioni di altezza e peso. *Controindicazioni: il prodotto non è adatto a persone con scarsa forza nelle braccia, con un equilibrio carente o con notevoli disabilità cognitive. Il prodotto è progettato e approvato per uso interno ed esterno. All'esterno il deambulatore è destinato ad essere un aiuto per camminare su strade e sentieri. Non è adatto a terreni accidentati e / o ripidi, né per le scale.*

Per conoscere meglio le caratteristiche del deambulatore ed imparare ad usarlo correttamente, si consiglia la formazione da parte di un professionista o da parte del rivenditore autorizzato.

0 I cerchi numerati grigi in questo manuale d'uso si riferiscono alla grafica informativa numerata e alle illustrazioni all'interno della copertina

1 Conosci il tuo prodotto TOPRO

A Maniglia	I Leva per la regolazione dell'altezza
B Leva freno	J Cestello
C Campanello	K Telaio laterale
D Tubo manopole	L Protezione dei bordi
E Cavo freno	M Blocco freno
F Barre del sedile / Maniglia di trasporto	N Funzione di inclinazione
G Gancio di bloccaggio	O Ruote staccabili
H Sedile con cinturino per meccanismo di chiusura	P Etichetta del prodotto

2 Sicurezza

Quando si piega e si apre il deambulatore, stare attenti a non schiacciarsi le dita.

Attenzione a non mettere le dita in fori aperti o tra le parti fisse.

Assicurarsi che la leva per la regolazione dell'altezza delle maniglie sia ben bloccata.

Quando il deambulatore è fermo o parcheggiato, assicurarsi che i freni di stazionamento su entrambi i lati siano in posizione bloccata (A).

Non utilizzare il deambulatore sulle scale. Fare attenzione quando si superano i cordoli, ecc.

Controllare i freni prima dell'uso ogni volta e che il deambulatore si blocchi in posizione aperta.

Non utilizzare il deambulatore, per trasportare carichi pesanti o persone.

Essere consapevoli che alcune parti del deambulatore potrebbero risultare calde o fredde se esposte a temperature estreme.

Non modificare il prodotto in quanto ciò potrebbe mettere a rischio la tua sicurezza e l'annullare la garanzia.

Prima di sedersi sul sedile (C), assicurarsi che i freni di stazionamento su entrambi i lati siano in posizione bloccata (A).

Per evitare il rischio di caduta, non sporgersi o piegarsi lateralmente o sul retro del deambulatore mentre si è in posizione seduta (D). Non inclinare

troppo il deambulatore lateralmente, per evitare il rischio di caduta. Per lo stesso motivo, le borse ecc. non devono mai essere appese alle manopole.

Per dare il giusto supporto e sicurezza, camminare dritto e assicurarsi che il deambulatore, sia tenuto il più vicino possibile al corpo (E). Camminare tra le ruote posteriori (F), non dietro di esse (G).

Tenere presente che il deambulatore potrebbe avanzare più velocemente dell'utente quando in tratti in discesa, il che potrebbe generare un rischio di caduta. Attivare i freni di guida per regolare la velocità (B).

Prestare attenzione quando si indossano gonne o pantaloni larghi in quanto potrebbero rimanere impigliati nelle ruote, causando una caduta. Indossare calzature robuste per evitare lesioni.

Per motivi di sicurezza è vietato sedersi sul deambulatore a bordo di mezzi di trasporto pubblico. Stivare il deambulatore in modo sicuro e assicurarsi che i freni di stazionamento su entrambi i lati siano attivati (A).

Non utilizzare il deambulatore su superfici scivolose o ghiacciate.

Tenere il deambulatore lontano dal fuoco e dagli oggetti caldi.

Non usare il deambulatore come supporto per raggiungere oggetti in alto.

3 Apertura / Chiusura

Apertura: rilasciare il gancio di bloccaggio posizionato sulle barre del sedile (A). Premere le barre del sedile verso il basso e verso l'esterno. I tubi laterali scorreranno in fuori. Premere verso il basso le barre del sedile (B). Si sentirà un "clic". Il deambulatore è ora bloccato nella sua posizione aperta.

Chiusura: tirare la cinghia sul sedile verso l'alto (C) e premere insieme i telai laterali. Bloccare il gancio (D) sopra le barre del sedile.

Trasporto del deambulatore: il deambulatore non deve essere trasportato dalla cinghia di seduta o dai cavi dei freni. Richiudere il deambulatore come mostrato nell'illustrazione (E). Afferrare il deambulatore dalle barre del sedile (F) quando è piegato.

4 Maniglie / Funzione di memoria

Regolazione dell'altezza: tirare la leva (A) verso l'alto e regolare il tubo della maniglia (B) all'altezza desiderata. Rilasciare la leva e muovere leggermente il tubo della maniglia su e giù fino a sentire un clic. Assicurarsi che la leva sia rivolta verso il basso (C). Regolare entrambe le maniglie alla stessa altezza confrontando la scala numerica su ciascun lato. *Si consiglia di impostare le maniglie alla stessa altezza dei polsi quando le braccia sono allineate accanto al corpo.*

Funzione di memoria: decidere l'altezza desiderata delle maniglie (vedi scala numerica). Contare i fori visibili sul retro dei tubi delle maniglie. Svitare la vite (D) nella parte superiore del blocco di fissaggio. Tirare la leva (A) verso l'alto ed estrarre il tubo (E) dal telaio. Il blocco di fissaggio (F) seguirà il tubo della maniglia. Spostare il blocco di fissaggio (F) in modo che il numero di fori sopra di esso corrisponda al numero precedentemente contato. Inserire il chip rosso di memoria (G) nel primo foro disponibile sotto il blocco di fissaggio (F). Tirare la leva (A) verso l'alto e spingere il tubo della maniglia (E) e il blocco di fissaggio (F) verso il basso e all'interno del telaio laterale (H). Riavvitare la vite (D) nella parte superiore del blocco di fissaggio. Tirare la leva (A) verso l'alto, sollevare la maniglia fino all'arresto e rilasciare la leva. Da questo momento in poi, quando le maniglie saranno nella posizione più bassa, si fermeranno automaticamente nella posizione preimpostata quando tirate verso l'alto.

5 Freni

Assicurarsi che i freni funzionino correttamente prima di ogni utilizzo. Ogni leva del freno (A) agisce su ciascuna delle ruote posteriori. *Non guidare o spingere il deambulatore mentre i freni di stazionamento sono attivati!*

Freni di stazionamento: spingere entrambe le leve del freno (A) verso il basso fino al bloccaggio. Entrambe le ruote posteriori sono ora bloccate. Premere entrambe le leve del freno verso l'alto per rilasciare i freni di stazionamento.

Freni di guida: tirare entrambe le leve del freno (B) verso l'alto per ridurre la velocità. *Non utilizzare continuamente mentre il deambulatore è in movimento.*

Regolazione / controllo: allentare il dado (C). Stringere il cavo del freno (D) con la vite di regolazione (E). Regolare il blocco freno (F) in modo che la distanza dal freno a tamburo interno sia di circa 1,5 mm, quindi stringere il dado (C). Ruotare la ruota per verificare che il blocco freno non tocchi la ruota.

Manutenzione: pulire frequentemente il blocco freno (F) e la molla del freno (G). Le ruote e i freni possono essere sostituiti se sono usurati o danneggiati.

6 Ruote staccabili

Rimozione: allentare la leva del freno. Premere il pulsante rosso sul mozzo (A) e far scorrere la ruota fuori dall'asse (B) mentre si tiene premuto il pulsante verso il basso.

Attacco: allentare la leva del freno. Far scorrere la ruota fino all'asse (B). Spingere la ruota il più lontano possibile verso l'interno dell'asse per far scattare la ruota sull'asse. Si sentirà un "clic" quando la ruota è in posizione. La ruota è fissata saldamente quando l'asse è completamente visibile al centro del mozzo (C). Tirare delicatamente la ruota per verificare che sia fissata saldamente all'asse. Dopo che la nuova ruota è stata montata sul deambulatore, assicurarsi che i freni funzionino correttamente. Se necessario, regolarli di nuovo (*vedere la sezione Freni*). *Si prega di notare che le ruote anteriori e posteriori sono diverse. Le ruote posteriori hanno un anello per la frenata interna.*

7 Sedile

Il deambulatore ha un sedile a rete sicuro e comodo, attraverso il quale si ha una vista a terra mentre si cammina. Può essere facilmente pulito con un panno, se necessario. I freni di stazionamento devono essere attivati prima di utilizzare il sedile. Spingere entrambe le leve del freno verso il basso fino a bloccare (A). Entrambe le ruote posteriori sono ora bloccate. Siediti con la schiena verso la sacca portaoggetti (B).

8 Protezione dei bordi / Funzione di inclinazione

Protezione dei bordi: le protezioni dei bordi (A), che si trovano davanti alle ruote posteriori, impediscono alle ruote posteriori di sbattere contro angoli, telai delle porte, ecc.

Funzione di inclinazione: per utilizzare la funzione di inclinazione utilizzare la parte anteriore del piede e premere verso il basso sul pedale di inclinazione (B), che si trova accanto alla ruota posteriore. Questo aiuta a inclinare il deambulatore oltre soglie, bordi ecc. Nota: fare attenzione quando si superano i cordoli, ecc.

9 Sacca portaoggetti

La sacca può contenere fino a 10 chili e può essere lavata delicatamente fino a 60 °C.

Montaggio: attivare i freni di stazionamento (A). Posizionare le staffe sulla sacca (B) sulle maniglie di trasporto del deambulatore e spingerle verso il basso. Se posizionato correttamente, si sentirà un "clic". Assicurarsi che il cavo del freno continui a scorrere senza freni lungo il telaio (C).

Rimozione: attivare i freni di stazionamento (A). Posizionare le mani verso la parte anteriore della sacca, su entrambi i lati. Sollevare la sacca schiacciandola leggermente. Fare attenzione a non farsi male alle dita.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip offre un'impugnatura ergonomica e superfici di supporto. La parte anteriore superiore delle maniglie offre una posizione di presa costante quando ci si alza da una sedia o da un divano. Assicurarsi sempre che i freni di stazionamento siano attivati quando ci si alza dalla posizione seduta. L'ErgoGrip offre anche un supporto extra in piedi. Utilizzare sempre la posizione di presa tradizionale per un facile accesso ai freni di guida mentre si cammina.

Trasporto

Il deambulatore deve essere trasportato in posizione piegata e bloccata (vedi paragrafo 3 *Apertura / Chiusura*). Assicurarsi che il morsetto di blocco sia attivato, in modo che il deambulatore non possa aprirsi involontariamente. Fare attenzione quando si carica il deambulatore in un veicolo e fissarlo correttamente. Il deambulatore può essere posato sollevandolo dal tubo del telaio.

Conservazione quando non in uso

Il deambulatore deve essere riposto in posizione verticale. Se conservato all'aperto deve essere sotto una copertura per proteggerlo. Non lasciare il deambulatore incustodito. Non mettere oggetti pesanti sopra deambulatore quando non viene utilizzato.

Pulizia

Il deambulatore può essere pulito con un panno umido. In caso di accumulo di fango e sporcizia, è possibile utilizzare un panno con un detergente per lavaggio delicato seguito da risciacquo con acqua tiepida. Evitare il lavaggio diretto contro i cuscinetti a sfera (nelle ruote e nelle forcelle anteriori). Non utilizzare abrasivi o lavare a vapore. Asciugare il deambulatore usando un panno morbido.

Disinfezione

La disinfezione deve essere effettuata solo da personale autorizzato. Si prega di contattare il rivenditore locale o il centro di assistenza alla mobilità. Durante la disinfezione devono essere indossati dispositivi di protezione sufficienti e devono essere seguite le istruzioni del produttore del disinfettante. Le superfici del deambulatore devono essere pulite con un panno morbido o una spugna e un disinfettante chimico approvato contenente il 70-80 % di etanolo. Sconsigliamo disinfettanti contenenti cloro o fenolo. *Il produttore non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni o lesioni verificatisi utilizzando disinfettanti/metodi dannosi o per la disinfezione effettuata da personale non autorizzato.*

Ispezione / Manutenzione / Riutilizzo

Si raccomanda di eseguire regolarmente l'ispezione e la manutenzione (la frequenza è determinata da come e con quale frequenza viene utilizzato il deambulatore). Controllare i seguenti elementi: telaio, viti, maniglie, tubi delle manopole, freni, parti dei freni, ruote, sedile e accessori. Ciò vale anche quando il deambulatore deve essere preparato per il riutilizzo. Si prega di consultare le istruzioni dettagliate in questo manuale utente sulla manutenzione dei freni e la pulizia / disinfezione. La manutenzione raccomandata non è un requisito e non è richiesta alcuna manutenzione preventiva a condizione che il deambulatore venga utilizzato come previsto secondo questo manuale utente.

Materiale / Riciclaggio

Il deambulatore è costituito da tubi in alluminio plastificati, giunti in plastica e materiale in plastica e poliestere. Ci sono cuscinetti a sfere in tutte le ruote e forcelle. La maggior parte delle parti del deambulatore può essere riciclata. Smaltire il deambulatore e il suo imballaggio secondo le normative applicabili nel proprio paese. Per informazioni, si prega di contattare le autorità pubbliche.

Garanzia

TOPRO Troja 5G è garantito privo di difetti per 7 anni. I danni causati da un uso scorretto o le parti esposte all'usura naturale (ad es. blocco freno, cavo del freno, ruota, cestello, sedile e maniglia) sono esclusi dalla garanzia di 7 anni. Per le riparazioni durante il periodo di garanzia, contattare il negozio o il rivenditore locale. La garanzia è nulla se pezzi di ricambio e accessori non autorizzati sono stati o vengono utilizzati sul prodotto. La durata prevista del prodotto è stimata in 10 anni, a condizione che venga utilizzato nel modo corretto secondo questo manuale d'uso e le sue istruzioni di sicurezza e manutenzione.

10 Etichetta del prodotto

- 1 - Fabbricante
- 2 - Consultare le istruzioni per l'uso (icona blu)
- 3 - Nome del modello
- 4 - Numero di modello
- 5 - Data di fabbricazione
- 6 - Numero di serie
- 7 - Numero dell'articolo del commercio globale (GTIN)
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Peso massimo dell'utente
- 10 - Lunghezza massima del deambulatore
- 11 - Larghezza massima / altezza del deambulatore
- 12 - Destinato all'uso interno ed esterno
- 13 - Dispositivo Medico
- 14 - Marcatura CE (Questo prodotto è conforme al Regolamento sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745)

Accessori

	Numero articolo TOPRO
Supporto schienale con imbottitura, 67 cm	815270
Supporto schienale con imbottitura, 75 cm	815272
Vassoio	814728
Tappetino antiscivolo per vassoio	814059
Porta stampelle, nero	814040
Portabottiglia, nero	814043
Lampada a LED con clip-on e spina USB	815260
Ombrello con attacco, nero	814068
Freno con una sola mano	814026
Maniglia di guida per ipovedenti	814014
Borsa posteriore con cerniera	814046
Targhetta	814024
Frizionatori, coppia	814038
Borsa di trasporto	814042
Cestello per bombola di ossigeno (solo compresso, non liquido)	814009
Ruote fuoristrada, set di quattro ruote	815302
Pneumatici chiodati, 2 ruote posteriori	815331

Gli accessori montati sul deambulatore possono influenzare la stabilità, consigliamo quindi di usarli con cura. Gli accessori possono essere ordinati separatamente per consentire a TOPRO Troja 5G di essere personalizzato in base alle esigenze individuali. Contatta il tuo negozio di mobilità, rivenditore o TOPRO per una panoramica aggiornata degli accessori disponibili o visita la nostra homepage topromobility.com.

Felicitaciones con su elección de un nuevo rollator TOPRO

Cada rollator TOPRO se desarrolla, diseña y fabrica en Noruega. El producto cumple con el Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745. Está probado y aprobado según en la norma EN ISO 11199-2:2021. Al recibir los productos, verifique su producto. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su tienda de movilidad o distribuidor de inmediato. Si tiene problemas para leer este manual de usuario, hay una versión electrónica disponible en topromobility.com.

Uso previsto

El TOPRO Troja 5G dará soporte a los usuarios con equilibrio reducido y / o capacidad de caminar reducida. Está diseñado para ser empujado, no tirado. El asiento integrado ofrece una oportunidad para que el usuario descanse si es necesario. El usuario previsto es un adulto. Se aplican restricciones de altura y peso. *Contraindicaciones: El producto no es adecuado para personas con baja fuerza en brazos, con muy mal equilibrio o con discapacidades cognitivas considerables. El producto está diseñado y aprobado tanto para uso en interiores como en exteriores. En exteriores, el rollator está destinado a ser una ayuda para caminar por caminos y sendas. No es adecuado en terrenos accidentados y/o escarpados, ni para escaleras.*

Para conocer el rollator y aprender a usarlo correctamente, se recomienda la formación por parte de un profesional.

0 Los círculos numerados grises en este manual de usuario se refieren al gráfico de información numerada y las ilustraciones dentro de la cubierta.

1 Conozca su producto TOPRO

A	Asa	I	Palanca para ajustar la altura
B	Palanca de freno	J	Bolsa de la compra
C	Campana	K	Marco lateral
D	Tubo de mango	L	Protector de borde
E	Cable de freno	M	Bloque de freno
F	Barras de asiento / Asa de transporte	N	Función de inclinación
G	Abrazadera de bloqueo	O	Ruedas desmontables
H	Asiento con correa para mecanismo plegable	P	Etiqueta del producto

2 Seguridad

Al doblar y desplegar el rollator, tenga en cuenta para no lastimarse los dedos.

Tenga en cuenta no poner los dedos en agujeros abiertos o entre partes estacionarias.

Asegúrese de que la palanca de ajuste de la altura de las empuñaduras esté firmemente bloqueada.

Cuando esté parado o estacionado, asegúrese de que los frenos de estacionamiento en ambos lados estén activados (A).

No use el rollator en las escaleras. Tenga cuidado al pasar por los bordillos, etc.

Compruebe los frenos antes de usarlos cada vez, y que el rollator se bloquee en posición desplegada.

No utilice el rollator para transportar cargas pesadas o personas.

Tenga en cuenta que algunas partes del rollator pueden sentirse calientes o frías cuando se exponen a temperaturas extremas.

No modifique el producto, ya que esto podría poner en riesgo su seguridad y la garantía se anulará.

Antes de sentarse en el asiento (C), asegúrese de que los frenos de estacionamiento en ambos lados estén activados (A).

Para reducir el riesgo de caídas, no se incline ni se doble hacia los lados o hacia la

parte posterior del rollator mientras esté sentado (D). No incline el rollator demasiado hacia los lados, para evitar el riesgo de caídas. Por la misma razón, las bolsas, etc., nunca deben colgarse en las asas.

Para dar el soporte y la seguridad adecuados, camine recto y asegúrese de que el rollator se mantenga lo más cerca posible de su cuerpo (E). Camina entre las ruedas traseras (F), no detrás de ellas (G).

Tenga en cuenta que el rollator puede rodar más rápido que usted al caminar cuesta abajo, lo que puede ponerlo en riesgo de caerse. Active los frenos de conducción para ajustar la velocidad (B).

Tenga cuidado al usar faldas o pantalones revoloteantes, ya que podrían quedar atrapados en las ruedas, lo que podría provocar caídas. Use calzado resistente para evitar lesiones.

Por razones de seguridad está prohibido sentarse en el rollator durante el transporte público. Guarde su rollator de forma segura y asegúrese de que los frenos de estacionamiento en ambos lados estén activados (A).

No utilice el rollator en superficies resbaladizas o heladas.

Mantenga el rollator alejado del fuego y de los artículos calientes.

No se suba al rollator.

3 Despliegue / Plegado

Despliegue: Suelte la abrazadera de bloqueo colocada en las barras del asiento (A). Presione las barras del asiento hacia abajo y hacia afuera. Los marcos laterales se deslizarán por separado. Presione hacia abajo las barras del asiento (B). Escuchará un sonido de clic. El rollator ahora está bloqueado en su posición abierta.

Plegable: Tire de la correa del asiento (C) y presione los marcos laterales juntos. Bloquee la abrazadera (D) sobre las barras del asiento.

Transporte del rollator: El rollator no debe ser transportado por la correa del asiento o los cables del freno. Doble el rollator como se muestra en la ilustración (E). Lleve el rodillo por las barras del asiento (F) cuando esté plegado.

4 Función de mangos / Memoria

Ajuste de altura: Tire de la palanca (A) hacia arriba y ajuste el tubo del asa (B) a la altura deseada. Suelte la palanca y mueva ligeramente el tubo del asa hacia arriba y hacia abajo hasta escuchar un clic. Asegúrese de que la palanca esté orientada hacia abajo (C). Ajuste ambas asas a la misma altura comparando la escala numérica en cada lado. *Se recomienda que las asas estén ajustadas a la misma altura que las muñecas cuando los brazos cuelgan junto a su cuerpo.*

Función de memoria: Decida la altura deseada de las asas (ver escala numérica). Cuento los orificios visibles en la parte posterior de los tubos de las asas. Desatornille el tornillo (D) en la parte superior de la pieza de fijación. Tire de la palanca (A) hacia arriba y extraiga el tubo (E) del bastidor. La pieza de fijación (F) seguirá al tubo del asa. Mueva la pieza de fijación (F) de forma que el número de orificios sobre ella coincida con el número contado previamente. Inserte el chip de memoria rojo (G) en el primer orificio disponible debajo de la pieza de fijación (F). Tire de la palanca (A) hacia arriba y empuje el tubo del asa (E) y la pieza de fijación (F) hacia abajo dentro del bastidor lateral (H). Vuelva a colocar el tornillo (D) en la parte superior de la pieza de fijación. Tire de la palanca (A), suba el asa hasta que se detenga y luego suelte la palanca. A partir de ahora, cuando las asas estén en la posición más baja, se detendrán en la posición predefinida al ser levantadas.

5 Frenos

Asegúrese de que los frenos estén funcionando antes de cada viaje. Cada palanca de freno (A) funciona en cada una de las ruedas traseras. *No conduzca ni empuje el rollator mientras los frenos de estacionamiento estén activados.*

Frenos de estacionamiento: Empuje ambas palancas de freno (A) hacia abajo hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras ahora están bloqueadas. Apriete ambas palancas de freno hacia arriba para liberar los frenos de estacionamiento.

Frenos de conducción: Tire de ambas palancas de freno (B) hacia arriba para reducir la velocidad. *No lo use continuamente mientras el rollator esté en movimiento.*

Ajuste / comprobación: Afloje la tuerca (C). Apriete el cable del freno (D) con el tornillo de ajuste (E). Ajuste el bloque de freno (F) para que la distancia al freno de tambor interno sea de aproximadamente 1,5 mm y, a continuación, apriete la tuerca (C). Gire la rueda para comprobar que el bloque de freno no está tocando la rueda.

Mantenimiento: Limpie el bloque de freno (F) y el resorte de freno (G) regularmente. Las ruedas y los frenos se pueden reemplazar si están desgastados o dañados.

6 Ruedas desmontables

Extracción: Afloje la palanca de freno. Presione el botón rojo en el cubo (A) y deslice la rueda fuera del eje (B) mientras presiona el botón hacia abajo.

Fijación: Afloje la palanca de freno. Deslice la rueda hacia el eje (B). Empuje la rueda lo más lejos posible hacia adentro en el eje para hacer que la rueda se encaje en el eje. Escuchará un "clic" cuando la rueda se asegure en posición bloqueada. La rueda se sujeta de forma segura cuando el eje es completamente visible en el centro del buje (C). Tire suavemente de la rueda para comprobar que está bien sujeta al eje. Después de aplicar la nueva rueda al rollator, asegúrese de que los frenos funcionen correctamente. Reajustarlos si es necesario (ver sección Frenos).

Tenga en cuenta que las ruedas delanteras y traseras son diferentes. Las ruedas traseras tienen un anillo para el frenado interior.

7 Asiento

El rollator tiene un asiento de malla seguro y conveniente, que proporciona vista al suelo mientras camina. Se puede limpiar fácilmente con un paño si es necesario. Los frenos de estacionamiento deben activarse antes de usar el asiento. Empuje ambas palancas de freno hacia abajo hasta que se bloqueen (A). Ambas ruedas traseras ahora están bloqueadas. Siéntate de espaldas hacia la bolsa (B).

8 Función de protección de bordes / Inclínación

Protector de borde: Los protectores de borde (A), que están delante de las ruedas traseras, evitan que las ruedas traseras se enganchen en las esquinas, marcos de las puertas, etc.

Función de inclinación: Para usar la función de inclinación, use la parte delantera del pie y presione hacia abajo el pedal de inclinación (B), que está al lado de la rueda trasera. Esto ayuda a inclinar el rollator sobre umbrales, bordes, etc. Tenga en cuenta: Tenga cuidado al pasar por los bordillos, etc.

9 Bolsa de la compra

La bolsa tiene capacidad para 10 kilos y se puede lavar suavemente hasta 60 °C.

Montaje: Aplicar los frenos de estacionamiento (A). Coloque los soportes de la bolsa (B) en las asas de transporte del rollator y presiónelos hacia abajo. Cuando se coloca correctamente, escuchará un sonido de clic. Asegúrese de que el cable del freno siga funcionando sin restricciones a lo largo del bastidor (C).

Desmontaje: Aplicar los frenos de estacionamiento (A). Coloque las manos hacia la parte delantera de la bolsa, a ambos lados. Levante la bolsa hacia arriba mientras la presiona ligeramente junta. Tenga en cuenta para no lastimarse los dedos.

TOPRO ErgoGrip

TOPRO ErgoGrip ofrece agarre ergonómico y superficies de soporte. La parte delantera superior de las manijas proporciona una posición de agarre constante al levantarse de una silla o sofá. Asegúrese siempre de que los frenos de estacionamiento estén activados al levantarse de la posición sentada. El ErgoGrip también ofrece un soporte adicional mientras está de pie. Utilice siempre la posición de agarre tradicional para facilitar el acceso a los frenos de conducción mientras camina.

Transporte

El rollator debe transportarse en la posición plegada y bloqueada (consulte la sección *Despliegue / Plegado*). Asegúrese de que la abrazadera de bloqueo esté encendida, de modo que el rollator no pueda desplegarse involuntariamente. Tenga cuidado al cargar el rollator en un vehículo, prestando atención a asegurarlo. El rollator puede acostarlo tomándolo por el tubo del marco.

Almacenamiento

El rollator debe almacenarse en posición vertical. Si se almacena al aire libre, debe estar debajo de una cubierta para protegerlo. No deje el rollator desatendido. No coloque artículos pesados encima del rollator durante el almacenamiento.

Limpieza

El rollator se puede limpiar con un paño húmedo. En caso de acumulación de barro y suciedad, se puede usar un paño con un detergente de lavado suave seguido de un enjuague con agua tibia. Evite enjuagar directamente contra los rodamientos de bolas (en ruedas y horquillas delanteras). No use abrasivos ni lavados a vapor. Seque el rollator con un paño suave.

Desinfección

La desinfección solo debe ser realizada por personal autorizado. Póngase en contacto con su concesionario local o centro de ayuda a la movilidad. Durante la desinfección se debe usar suficiente equipo de protección y se deben seguir las instrucciones del fabricante del desinfectante. La superficie del rollator debe limpiarse con un paño suave o esponja y un desinfectante químico aprobado que contenga etanol al 70–80 %. Aconsejamos no desinfectar que contenga cloro o fenol. *El fabricante no se hace responsable de ningún daño o lesión ocurrida con desinfectante/métodos de desinfección dañinos o desinfección llevada a cabo por personal no autorizado.*

Inspección / Mantenimiento / Reutilización

Se recomienda que la inspección y el mantenimiento se lleven a cabo regularmente (la frecuencia está determinada por cómo y con qué frecuencia se utiliza el rollator). Compruebe los siguientes elementos: Marco, tornillos, asas, tubos de mango, frenos, piezas de freno, ruedas, asiento y accesorios. Esto también se aplica cuando el rollator debe prepararse para su reutilización. Consulte las instrucciones detalladas en este manual de usuario sobre el mantenimiento de los frenos y la limpieza/desinfección. El mantenimiento recomendado no es un requisito, y no se requiere mantenimiento preventivo siempre que el rollator se utilice según lo previsto de acuerdo con este manual del usuario.

Material / Reciclaje

El rollator está hecho de tubos de aluminio recubiertos de plástico, acoplamientos de plástico y material hecho de plástico y poliéster. Hay rodamientos de bolas en todas las ruedas y horquillas. La mayoría de las piezas del rollator se pueden reciclar. Deseche el enrollador y su embalaje de acuerdo con la normativa aplicable en su país. Para obtener información, póngase en contacto con sus autoridades públicas.

Garantía

TOPRO Troja 5G está garantizado libre de fallos y defectos durante 7 años. Los daños causados por un uso incorrecto o las piezas que están expuestas al desgaste natural (por ejemplo, bloque de freno, cable de freno, rueda, bolsa, asiento y mango) están exentos de la garantía de 7 años. Para reparaciones durante el período de garantía, póngase en contacto con su tienda de movilidad o distribuidor local. La garantía es nula si se han utilizado o se están utilizando piezas de repuesto o accesorios no autorizados en el producto. La vida útil esperada del producto se estima en 10 años si se utiliza de la manera correcta de acuerdo con este manual de usuario y sus instrucciones de seguridad y mantenimiento.

10 Etiqueta del producto

- 1 - Fabricante
- 2 - Consulte las instrucciones de uso (icono azul)
- 3 - Nombre del modelo
- 4 - Número de modelo
- 5 - Fecha de fabricación
- 6 - Número de serie
- 7 - Número de artículo comercial global
- 8 - GS1 DataMatrix
- 9 - Peso máximo del usuario
- 10 - Longitud máxima del rollator
- 11 - Anchura / altura máxima del rollator
- 12 - Destinado para uso en interiores y exteriores
- 13 - Dispositivo médico
- 14 - Marcado CE (este producto cumple con el Reglamento de Dispositivos Médicos (UE) 2017/745)

Accesorios

	Artículo TOPRO No.
Soporte trasero con acolchado, 67 cm	815270
Soporte trasero con acolchad, 75 cm	815272
Bandeja	814728
Alfombra antideslizante para bandeja	814059
Soporte de muleta, negro	814040
Portabotellas, negro	814043
Lámpara LED con clip-on y enchufe USB	815260
Paraguas con sujeción, negro	814068
Freno con una sola mano	814026
Mango guía para personas con discapacidad visual	814014
Bolsa trasera con cremallera	814046
Etiqueta de nombre	814024
Sistema de resistencia al balanceo, par	814038
Bolsa de transporte	814042
Cesta para botella de oxígeno (solo comprimida, no líquida)	814009
Ruedas todoterreno, juego de cuatro	815302
Neumáticos con clavos, 2 ruedas traseras	815331

Los accesorios montados en el rollator pueden influir en la estabilidad, por lo tanto, le recomendamos que los use con cuidado. Los accesorios se pueden pedir por separado para permitir que TOPRO Troja 5G se personalice según las necesidades individuales. Póngase en contacto con su tienda de movilidad, distribuidor o TOPRO para obtener una visión general actualizada de los accesorios disponibles o visite nuestra página de inicio topromobility.com.

TOPRO rollators are developed, designed and manufactured in Norway by:

TOPRO Industri AS

Rambekkveien 1, NO-2816 Gjøvik, Norway

(+47) 61 13 46 00 info@topromobility.com

www.topromobility.com



Distributor / dealer

Learn more



topromobility.com

topromobility.com



Art. No. User Manual: 105132 – Revision B, 2025-07